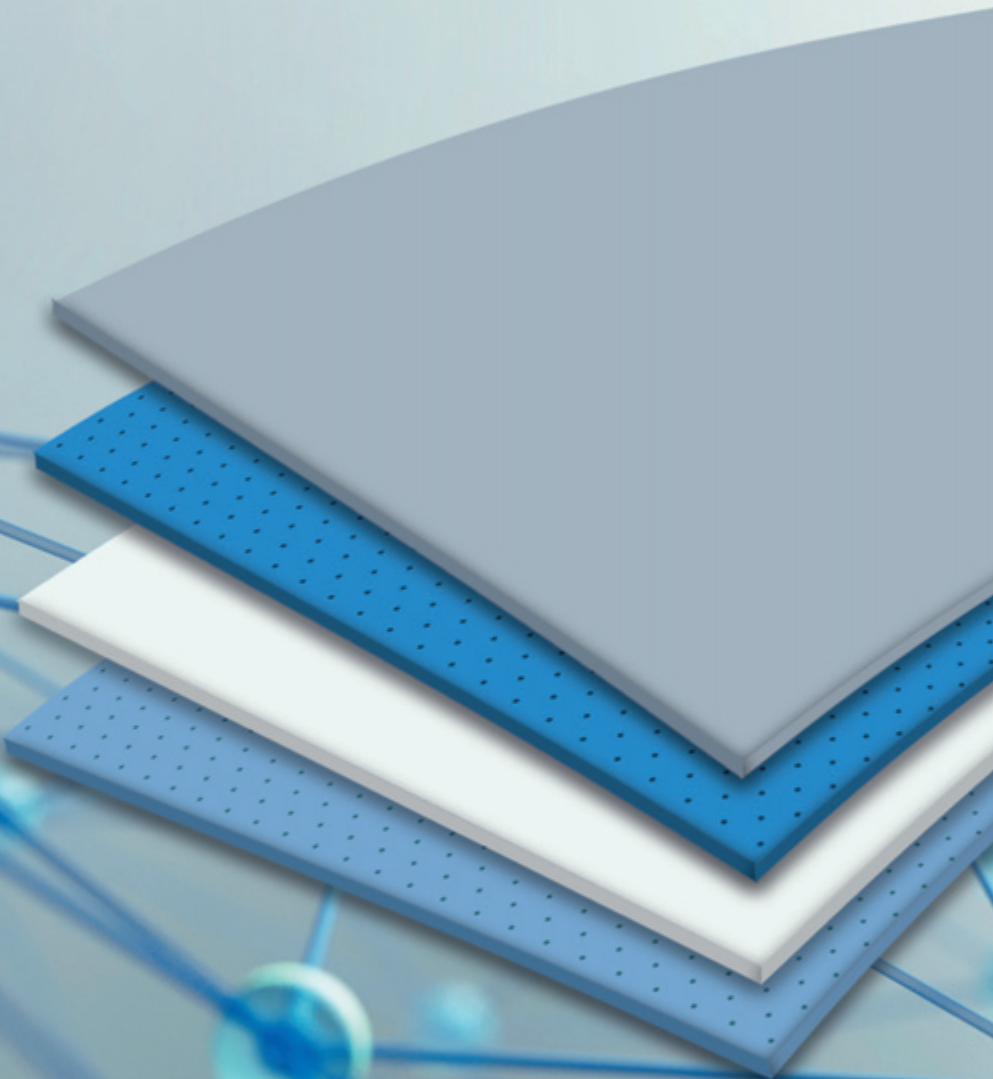


Zertifizierte
Qualitätsprodukte
aus EVA und Kautschuk,
für Handwerk und Industrie

Sortiment 2023/2024



**MADE IN
GERMANY**

EVA solutions for health and industry
www.nora-material.de | www.nora-material.com

nora[®]
by **Interface**[®]

Produktionsstandort Weinheim

Wir sind ein **deutscher Hersteller** von hochwertigen **geschlossenzelligen** Plattenmaterialien aus **EVA** sowie Produkten aus **Kautschuk**.

Unsere **zertifizierten Markenartikel** werden in der Orthopädie-Schuhtechnik, Orthopädie-Technik, Schuhindustrie, dem Schuhmacherhandwerk und zahlreichen industriellen Einsatzbereichen verarbeitet.

Seit 2018 gehört die nora systems GmbH zur Interface Inc. mit Sitz in Atlanta, USA.

Seit mehr als 80 Jahren ist **Weinheim** an der Bergstraße, in Baden-Württemberg, Unternehmenssitz und derzeit einziger **Produktionsstandort**.



EVA- und Zellkautschukmaterial

	<i>Materialien für den Bettungsbau im Überblick</i>	6	
Aufbau- und Polsterplatten	Lunatec fusion 20, Lunatec fusion 30	9	
	Lunatec fusion 40, Lunatec fusion 50	10	
	Lunairmed, Lunairflex	11	
	Lunalastik, Lunatec EP	12	
	Lunatec motion, Lunatec motion 20, Astro med 10	13	
	Astro form 8, Astro form 15	14	
	Aero sorb M, Aero sorb W	15	
	Lunatur 18 Walnut, Lunatur 27 Walnut, Lunatur 50 Walnut	17	
	Lunasoft SLW, Lunasoft SLW trendline	18	
	Lunasoft SL, Lunasoft SL color	19	
	Lunasoft SL color plus/quattro, Lunasoft SL trendline	20	
	Lunatec SE, Lunasoft AL	21	
	Lunalight A	22	
	Lunacell	23	
	Stabilisierungsplatten	Norit L, Norit	23
	Verbundplatten	Lunatur combi CW	17
Lunatec combi 1, Lunatec combi 2		24	
Lunatec combi 3, Lunatec combi 4, Lunatec combi 5, Lunatec combi 6		25	
Lunatec combi 7, Lunatec combi 8, Lunatec combi motion 1		26	
Lunatec combi cork 1, Lunatec combi T1, Lunatec combi motion T2		27	
Fräsplatten	Lunatec CAD 25, Lunatec CAD 30, Lunatec CAD 35	28	
	Lunatec CAD 45, Lunatec CAD 55	28	
	Lunatec combiCAD 1, Lunatec combiCAD 2	29	
Aufbaukeilstreifen	Lunasoft SLW Keil, Lunalight K	30	
Schockabsorber	Supersorb, Orthosorb	31	
Puffergummi	Schweizer Puffergummi	31	

Laufsohlenmaterial

Sohlenplatten	Lunasoft	32
	Astro Soft	33
	Astrolight Star, Astrolight Delta	34
	Astro	35
	Astral	37
	Durotrans	39
	Contol A, Contol FB, Constant, Por	40
	Contilit	41
Spitzenstreifen	Contilit K	41

Absatzmaterial

Absatzplatten	Elite, Glorit	42
	Conrex, Astral H, Comfort	43
Absatzfleckstreifen	Astral H	44
Stanzflecke	Elite	44
Keilstreifen	Compakt K, Astral K, Astro K	45

Für Materialien (Werkstoffe), die zur Herstellung eines Medizinproduktes verwendet werden, verlangt die **MDR** (Medical Device Regulation, Verordnung EU 2017/745) u.a. die **Bescheinigung der Unbedenklichkeit** der eingesetzten Materialien hinsichtlich Toxikologie.

✓ **nora® Produkte sind gemäß VO EU 2017/745 frei von toxikologisch bedenklichen und karzinogenen Inhaltsstoffen.**

Außerdem sind **nora® EVA-Materialien** frei von Phthalaten und Latex.

Die geschlossenzellige Oberflächenbeschaffenheit der **EVA-Materialien** minimiert das Risiko einer Gesundheitsgefährdung durch anhaftende Keime und Bakterien, da eine vollständige hygienische Reinigung & Desinfektion mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel an der Oberfläche möglich ist.

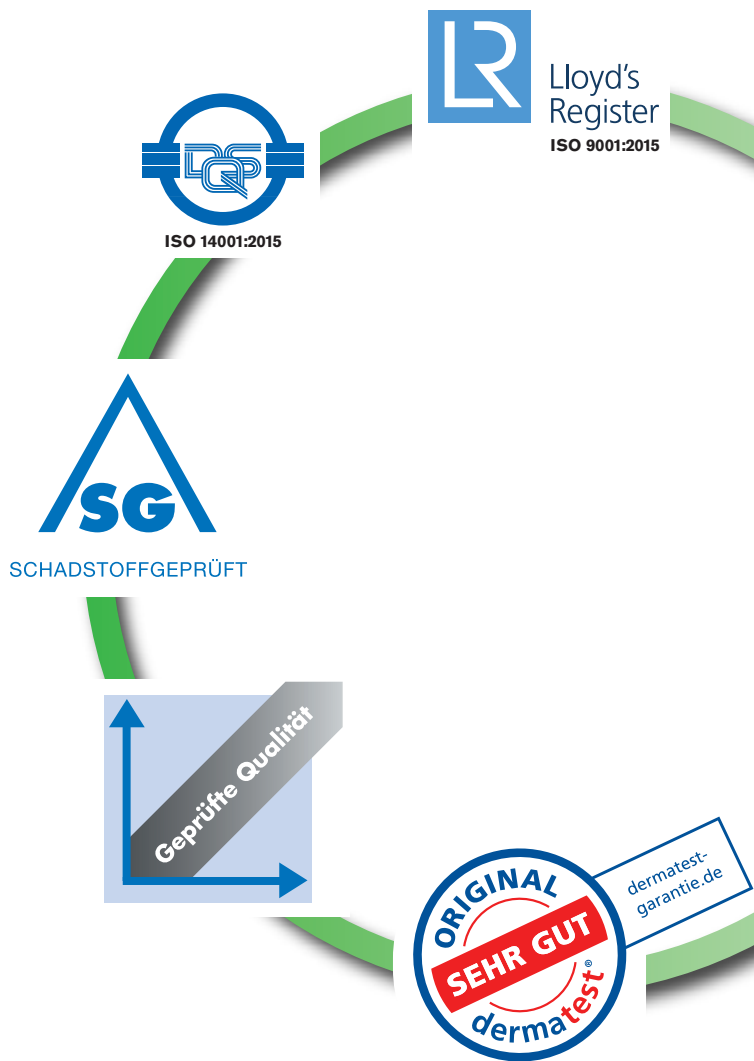
✓ **nora® EVA-Materialien** sind aufgrund ihrer Eigenschaften für die Verarbeitung zu Medizinprodukten der Klasse 1 geeignet. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird durch eine **Unbedenklichkeitserklärung** bestätigt.

Dynamische Dauerbelastungstests, nachgewiesene Desinfizierbarkeit, gewährleistetete Chargenrückverfolgbarkeit, geprüfte Zytotoxizität nach ISO 10993 und die geprüfte Hautverträglichkeit runden die permanenten Qualitätsmaßnahmen ab.

Für uns, als Hersteller von Materialien, die auch in medizinischen Produkten verarbeitet werden, gehört die Zertifizierung nach internationalen Normen ebenso zum Selbstverständnis wie die Einhaltung von geltenden Verordnungen wie z.B. REACH.



▶ Als deutscher Hersteller tragen wir eine besondere Verantwortung für verlässliche Qualität, innovative Produktentwicklungen, praxisgerechte Vielfalt und größtmögliche Sicherheit. Die QM-Zertifizierung nach ISO 9001:2015 und das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 gewährleisten als Basis die konstante Qualität unserer Produkte. Ergänzt wird dies durch zahlreiche freiwillige Maßnahmen und Zertifizierungen. Der Produktionsstandort Weinheim und die regelmäßige Qualitätskontrolle stehen für gleichbleibend hohe Qualität.



Alle **nora**® Produkte sind frei von toxischen Schwermetallen und krebserregenden aromatischen Aminen aus Farbstoffen. **nora**® Produkte sind außerdem frei von Pentachlorphenol (PCP) und krebserzeugenden N-Nitrosaminen.

SG Prüfzeichen

Dieses branchenweit bekannte **Schadstoffprüfzeichen** vergeben zugelassene Prüfinstitute nach regelmäßiger und intensiver Materialanalyse.

Neben der Prüfung gesetzlich vorgeschriebener Parameter bestätigt das SG-Paket z.B. auch, dass keine krebserregenden Amine nachweisbar sind.

✓ **Zahlreiche nora**® Produkte sind bereits seit 1998 nach dem jeweils aktuellen **SG Prüfkriterienkatalog** geprüft und zertifiziert.

Das Zertifikat der entscheidende Unterschied

Das **Schadstoffprüfzeichen SG** wird nach intensiver Materialanalyse vergeben. Das Prüfzeichen bestätigt, dass nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse keine Gefahren für die Gesundheit zu befürchten sind. Es berechtigt das Prüfinstitut, **jederzeit** Stichproben aus der **laufenden** Produktion zu entnehmen und stellt **keine einmalige** Prüfung dar.

✓ **nora**® Produkte sind grundsätzlich nicht nur geprüft, sondern zertifiziert. Ein einfacher Prüfbericht berechtigt nicht zur Führung des SG-Zeichens.

Dermatest-Siegel geprüfte Hautverträglichkeit

Seit 1988 werden **nora**® Produkte regelmäßig auf Hautverträglichkeit geprüft. Die dermatologischen Prüfungen werden am Menschen durchgeführt. In Epikutantests werden Probanden kleine Stücke des Materials auf die Haut geklebt und nach definierter Tragezeit von Fachärzten überprüft.

✓ **Diese Produkte tragen das Dermatest-Garantie-Siegel „sehr gut“.** Das garantiert Hautverträglichkeit und, dass vom Material keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen ausgehen.

Weitere Qualitätskontrollen

Schließlich runden permanente interne Kontrollen die Qualitätssicherungsmaßnahmen ab. So werden im Produktionsalltag, an **Rohstoffen** und **Fertigprodukten**, regelmäßig chemisch-physikalische Prüfungen durchgeführt, um eine gleichbleibend hohe und sichere Qualität zu gewährleisten.





Das **nora**[®] Sortiment bietet den Verarbeitern von Materialien aus **geschlossenzelligem EVA, Kautschuk und Leichtzellkautschuk** eine farbenfrohe Vielfalt bewährter Qualitäten und innovativer, lösungsorientierter Produktentwicklungen.

Die EVA-Leichtzellplatten werden vor allem als elastische **Polster- und Aufbaumaterialien** eingesetzt. Dafür steht ein breites Sortiment an Materialien mit **polsternder, bettender, dauerelastischer** oder **stabilisierender Funktion** zur Auswahl. Die Funktion eines Materials wird durch die individuelle Beschaffenheit, Dichte und Härte bestimmt.

Das **nora**[®] Sortiment ist zu 100% vegan und frei von Latex. Die Materialien gibt es in hellen Naturtönen, klassisch dunklen Farben sowie modernen Farbtönen und Designs. Durch die **Farbabstimmung über verschiedene Produkte** hinweg, können Aufbau- und Beschlusmaterialien farblich passend kombiniert werden.

Die EVA-Materialien zeichnen sich durch exzellente Verarbeitbarkeit aus, sie verfügen über eine sehr gute **thermoplastische Verformbarkeit** und lassen sich **optimal verkleben und schleifen**.



Unser Ziel war es schon immer, Materialien zu entwickeln, die den Menschen im Handwerk den **Arbeitsalltag erleichtern, Sicherheit geben** und neue Eigenschaften und vor allem **neue Lösungen** mit sich bringen.

Dazu gehören die mehrschichtigen **Verbundplatten** für den vereinfachten Aufbau mit Sandwich-Technik, ein Sortiment an **Fräsplatten** sowie Materialien mit speziellen **funktionalen Eigenschaften**, die z.B. Scherkräfte in der Bewegung aufnehmen.

Alle Platten sind in diversen Stärken, Formaten und Farben erhältlich. Aufgrund ihrer **geschlossenen Zellstruktur** sind EVA-Materialien **hygienisch abwaschbar**, so dass eine vollständige Reinigung und **Desinfektion** an der Oberfläche möglich ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Aufgrund ihrer hochwertigen Eigenschaften werden unsere Materialien auch in zahlreichen **industriellen Bereichen** eingesetzt, in denen ein **hochwertiger Schaumstoff** gefragt ist.

Polster- und Aufbauplatten

Produkt	Härte ca. Shore A	Dichte ca. g/cm ³	thermisch verformbar	Seite
Astro form 8	–	0,21	bei 110° – 130° C	14
Astro med 10	10	0,27	nein	13
Lunatec motion	12	0,13	bei 110° – 130° C	13
Astro form 15	15	0,32	bei 110° – 130° C	14
Aero sorb M	–	0,16	bei 110° – 130° C	15
Aero sorb W	–	0,16	bei 110° – 130° C	15
Lunairmed	16	0,08	bei 110° – 130° C	11
Lunatur 18 Walnut	18	0,12	bei 110° – 130° C	17
Lunatec motion 20	20	0,18	bei 110° – 130° C	13
Lunairflex	22	0,12	bei 110° – 130° C	11
Lunatec EP	23	0,21	bei 110° – 130° C	12
Lunalastik	25	0,20	bei 110° – 130° C	12
Lunatur 27 Walnut	27	0,23	bei 110° – 130° C	17
Lunasoft SLW	30	0,20	bei 130° C	18
Lunasoft SL	40	0,20	bei 130° C	19
Lunatec SE	45	0,29	bei 130° C	21
Lunatur 50 Walnut	50	0,34	bei 130° C	17
Lunasoft AL	53	0,26	bei 130° C	21
Lunalight A	60	0,35	bei 130° C	22
Lunacell	68	0,37	bei 130° C	23
Norit L	93	0,90	bei 130° C	23
Norit	95	1,00	bei 130° C	23

Alle Platten sind in diversen Stärken, Formaten und Farben erhältlich. Die empfohlenen Temperaturen sind Richtwerte, die je nach Dicke des Materials abweichen können. Je weicher ein Material, desto mehr Vorsicht bei hohen Temperaturen!

Eigenschaften

polsternd

bettend/schockabsorbierend

bettend

dauerelastisch

stabilisierend



Produktinformationen und
Verarbeitungstipps:



Verbundplatten Lunatec combi

Produkt Gesamtstärke	Schichten ca. mm	Härte ca. Shore A	Dichte ca. g/cm ³	Seite	Abb.
Lunatec combi 1	Lunalastik (6 mm)	25	0,23	24	
14 mm	Lunasoft AL (8 mm)	52	0,26		
Lunatec combi 2	Lunairflex (6 mm)	22	0,12	24	
16 mm	Lunasoft SLW (10 mm)	30	0,20		
Lunatec combi 3	Lunalastik (6 mm)	25	0,23	25	
16 mm	Lunasoft SLW (10 mm)	30	0,20		
Lunatec combi 4	Lunairflex (3 mm)	22	0,12	25	
9 mm	Lunalastik (6 mm)	25	0,23		
Lunatec combi 5	Lunalastik (3 mm)	25	0,23	25	
7 mm	Lunasoft SLW (4 mm)	30	0,20		
Lunatec combi 6	Lunasoft SLW (4 mm)	30	0,20	25	
14 mm	Lunasoft AL (10 mm)	52	0,26		
Lunatec combi 7	Lunasoft SLW (3 mm)	30	0,20	26	
7 mm	Lunasoft SL (4 mm)	40	0,20		
Lunatec combi 8	Lunatec EP (4 mm)	22	0,20	26	
12 mm	Lunatec SE (8 mm)	45	0,28		
Lunatec combi cork 1	Lunalastik (6 mm)	25	0,23	27	
14 mm	Lunatec cork H (8 mm)	50	0,35		
Lunatec combi CW	Lunatur 27 (6 mm)	27	0,23	17	
14 mm	Lunatec cork H (8 mm)	50	0,35		
Lunatec combi motion 1	Lunatec motion (6 mm)	12	0,13	26	
16 mm	Lunasoft SL (10 mm)	40	0,20		
Lunatec combi T1	Lunasoft SLW (3 mm)	30	0,20	27	
15 mm	Lunasoft Z (4 mm)	25	0,17		
	Lunasoft AL (8 mm)	52	0,26		
Lunatec combi motion T2	Lunatec motion (7 mm)	12	0,13	27	
20 mm	Lunasoft Z (5 mm)	25	0,16		
	Lunatec CAD35 (8 mm)	35	0,20		

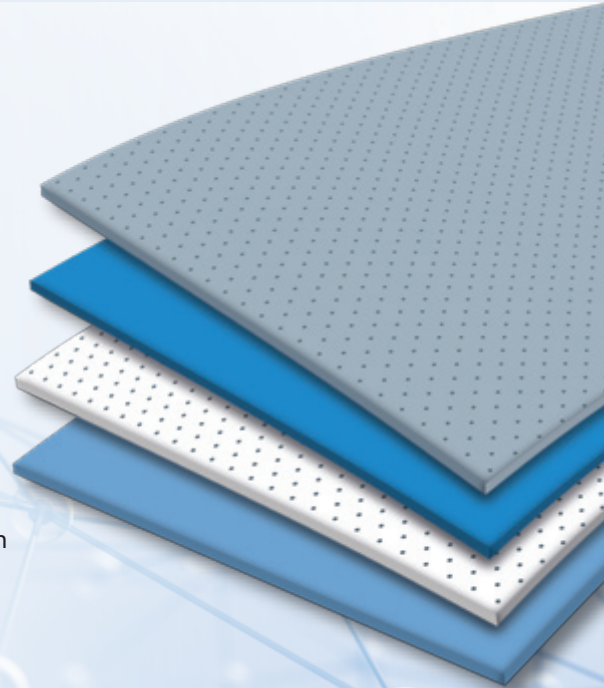
Weltneuheit:

nora[®] Lunatec fusion

verbindet sich direkt, ganz ohne Klebstoff ...

Lunatec fusion ist eine Weltneuheit im Bereich der expandierten EVA-Materialien, die eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung ohne die Zugabe von Klebstoff eingehen. Das ermöglicht ein schnelles, sauberes, umweltfreundliches und gesundes Arbeiten auf höchstem Qualitätsniveau, made in Germany.

Mit **Lunatec fusion** können orthopädische Einlagen und Fußbettungen komplett ohne Klebstoff angefertigt werden. Diese neuartigen Materialien verbinden sich während der thermoplastischen Verformung ausschließlich durch die Faktoren Wärme, Zeit und Druck miteinander und fusionieren zu einer dauerhaften Verbindung. Die EVA-Materialien verbinden sich direkt, ganz ohne Klebstoff oder Klebstoffkaschierung.




Die Vorteile liegen auf der Hand:

- ▶ enorme Zeit- und Kostenersparnis
- ▶ sauberes, schnelles und gesundes Arbeiten
- ▶ Einstreichen mit Klebstoff entfällt
- ▶ keine Verfärbungen und Verhärtungen
- ▶ keine Verschmutzung durch Klebstoff
- ▶ keine langen Ablüft- und Trocknungszeiten
- ▶ sofort nach dem Abkühlen einsatzbereit

Das Prinzip der Verbindung

Das Prinzip der „Verschmelzung“ auf EVA-Basis ist in der Industrie und dem Handwerk auch von lösemittelfreien Schmelzklebstoffen bekannt. Das EVA-Polymer gibt hierbei Stabilität und sorgt für eine optimale Verbindung.

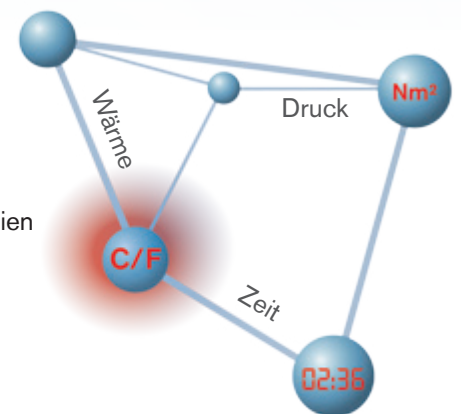Und so ähnlich funktioniert es bei **Lunatec fusion**: Die erwärmten EVA-Materialien verbinden sich während der Abkühlphase unmittelbar, **ohne Klebstoff** oder aufgebrauchte Zwischenschicht, fest miteinander.



Lunatec fusion	Dicke	Aufwärmzeit	Abkühlzeit
20	2 mm	30 Sek.	1 Min.
	3 mm	45 Sek.	1,5 Min.
	4 mm	1,5 Min.	3 Min.
30	2 mm	45 Sek.	1,5 Min.
	3 mm	1 Min.	2 Min.
	4 mm	2 Min.	4 Min.
40	6 mm	3 Min.	6 Min.
	8 mm	4 Min.	8 Min.
	12 mm	6 Min.	12 Min.
	50	8 mm	4,5 Min.
12 mm		7 Min.	14 Min.

Verarbeitungshinweise für eine sichere Verbindung ...

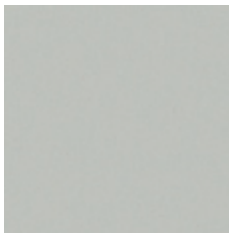
- ▶ verwendete Materialien **anrauen**
- ▶ **ein perforiertes** Material verwenden
- ▶ Einstellung des Ofens: 130° C, empfohlene **Zeiten einhalten**
- ▶ auf **ausreichend Druck** der Tiefziehmatte achten
- ▶ Faustformel: Aufwärmzeit x 2 = optimale Abkühlzeit

Bei perforierten Materialien kann die Aufwärmzeit um ca. ein Drittel verkürzt werden, da sich die Wärme schneller im Material verteilt. Für die optimale Abkühlzeit bitte die Gesamtstärke der verwendeten Materialien berücksichtigen.




nora® Lunatec fusion 20 EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert, randbeschlagen

NEU



60 hellgrau
glatt

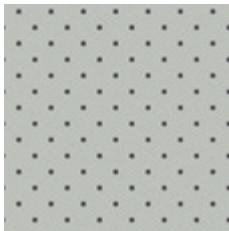

60 hellgrau
perforiert

Härte:
ca. 20 Shore A

Dichte:
ca. 0,12 g/cm³

Format:
ca. 1050x760 mm

▼ GLATT

Farbe: 60 hellgrau
Dicken: 2|3|4 mm

▼ PERFORIERT

Farbe: 60 hellgrau
Dicke: 4 mm

Eigenschaften:

Verbindung innerhalb des **nora® Lunatec fusion** Sortiments ohne Klebstoff möglich; leicht, weich und elastisch, niedrige Dichte, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort.

Verarbeitungshinweise:

Materialien anrauen, bei ca. 130° C thermisch formbar und unter ausreichend Druck ohne Klebstoff in Sandwichbauweise zu verarbeiten.

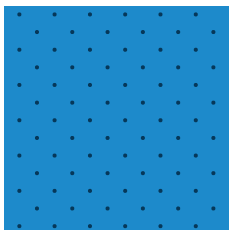


nora® Lunatec fusion 30 EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert, randbeschlagen

NEU



378 blau
glatt



378 blau
perforiert

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,15 g/cm³

Format:
ca. 1000x700 mm

▼ GLATT

Farbe: 378 blau
Dicken: 2|3|4|6 mm

▼ PERFORIERT

Farbe: 378 blau
Dicke: 4 mm

Eigenschaften:

Verbindung innerhalb des **nora® Lunatec fusion** Sortiments ohne Klebstoff möglich; leicht, formstabil, flexibel und elastisch, gutes Rückstellvermögen.

Verarbeitungshinweise:

Materialien anrauen, bei ca. 130° C thermisch formbar und unter ausreichend Druck ohne Klebstoff in Sandwichbauweise zu verarbeiten.



i


Da vulkanisierte EVA-Platten grundsätzlich aus hygienisch geschlossenen Zellen bestehen, funktioniert der Prozess optimal, wenn ein **perforiertes Material** verwendet wird und die zugeschnittenen Materialien vor der Verarbeitung durch Schleifen **angeraut** werden. Dadurch wird die Oberfläche für eine vollflächige Verbindung vergrößert. Ein gewohnter Arbeitsschritt, um auch bei der herkömmlichen Einlagenfertigung eine bessere Verbindung zu erreichen und Luft einschließen zu vermeiden.

Neben verschiedenen Materialschichten können auch weitere **Materialzuschnitte** (z.B. für Verstärkungen im Längsgewölbe) flexibel aufgelegt und in einem einzigen Tiefziehvorgang miteinander verbunden werden.

Aufbau- und Polsterplatten

nora® Lunatec fusion 40 EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert, randbeschlagen

NEU



09 weiß
glatt



09 weiß
perforiert

Härte:

ca. 40 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Format:

ca. 1040x625 mm

▼ **GLATT**

Farbe:

09 weiß

Dicken:

4 | 8 | 12 mm

▼ **PERFORIERT**

Farbe:

09 weiß

Dicken:

4 | 8 mm

Eigenschaften:

Verbindung innerhalb des **nora® Lunatec fusion** Sortiments ohne Klebstoff möglich; leicht, formstabil und elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort.

Verarbeitungshinweise:

Materialien anrauen, bei ca. 130° C thermisch formbar und unter ausreichend Druck ohne Klebstoff in Sandwichbauweise zu verarbeiten.

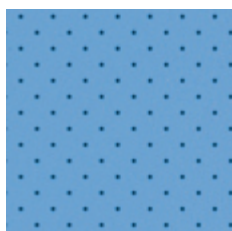


nora® Lunatec fusion 50 EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert, randbeschlagen

NEU



27 hellblau
glatt



27 hellblau
perforiert

Härte:

ca. 50 Shore A

Dichte:

ca. 0,30 g/cm³

Format:

ca. 1020x675 mm

▼ **GLATT**

Farbe:

27 hellblau

Dicken:

8 | 12 mm

▼ **PERFORIERT**

Farbe:

27 hellblau

Dicken:

4 | 8 mm

Eigenschaften:

Verbindung innerhalb des **nora® Lunatec fusion** Sortiments ohne Klebstoff möglich; formstabil und elastisch, hohes Rückstellvermögen.

Verarbeitungshinweise:

Materialien anrauen, bei ca. 130° C thermisch formbar und unter ausreichend Druck ohne Klebstoff in Sandwichbauweise zu verarbeiten.



i

Die erwärmten Materialien verbinden sich während der Abkühlphase unter Druck fest miteinander. Haben sich die Materialien einmal miteinander verbunden, wird es beim Trennungsversuch eher zu einem Materialbruch kommen, als dass sich die abgekühlten Schichten voneinander lösen. Dies wurde mit der Prüfung des Schälwiderstands nach DIN EN 1392 (Prüfung der Festigkeit von Klebungen) nachgewiesen. Das bedeutet, dass die entstandene Verbindung sogar eine höhere Festigkeit aufweist als das Material selbst.

Die **Lunatec fusion** Materialien wurden für eine besonders gesundheits- und umweltfreundliche Arbeitsweise, komplett **ohne Klebstoff**, entwickelt. Sie können aber wie alle anderen EVA-Materialien ebenso mit Klebstoff verarbeitet werden.

nora® Lunairmed EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert



07 beige
glatt



27 hellblau
glatt

Härte:
ca. 16 Shore A

Dichte:
ca. 0,08 g/cm³

Format:
ca. 1080x825 mm

▼ GLATT

Farben:	Dicken:
07 beige	2 3 4 5 6 8 10 12 24 mm
80 anthrazit	2 3 4 6 8 mm
27 hellblau	2 3 4 6 mm

▼ PERFORIERT

Farbe:	Dicken:
07 beige	3 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Polsterplatten im Innenschuhbereich. Für Formelemente bei leichter Beanspruchung z. B. Wadenersatzstücke, als Obermaterial für Interims-, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich, für Fußbettungen von Rheumatikern und Diabetikern, besonders geeignet für die Sandwichbauweise.

Eigenschaften:

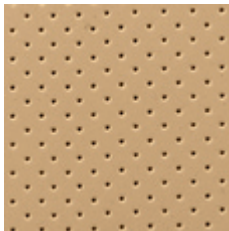
sehr niedrige Dichte, sehr weich, hochelastisch. Gutes Rückstellvermögen und hoher Gehkomfort. Abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, horizontale Verformung darf dabei nicht auftreten. Thermoformbar bei 110° – 130° C.



80 anthrazit
glatt



07 beige
perforiert

nora® Lunairflex EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert



07 beige
glatt



27 hellblau
glatt

Härte:
ca. 22 Shore A

Dichte:
ca. 0,12 g/cm³

Format:
ca. 1200x750 mm

▼ GLATT

Farben:	Dicken:
07 beige	2 3 4 5 6 8 10 12 24 mm
27 hellblau	2 3 4 5 6 mm

▼ PERFORIERT

Farbe:	Dicken:
07 beige	3 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

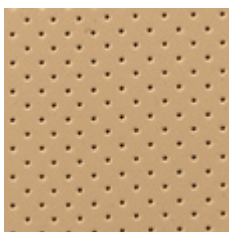
Polsterplatten im Innenschuhbereich. Für Formelemente bei mittlerer Beanspruchung, z. B. Wadenersatzstücke, als Obermaterial für Interims-, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich.

Eigenschaften:

sehr niedrige Dichte, weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen. Abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, horizontale Verformung darf dabei nicht auftreten. Thermoformbar bei 110° – 130° C.



07 beige
perforiert

Polsterplatten

nora® Lunalastik EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert



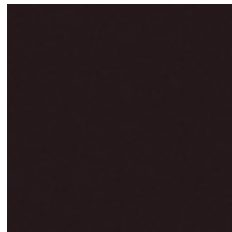
07 beige
glatt



27 hellblau
glatt



70 gelb
glatt



81 schwarz
glatt



07 beige
perforiert

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

Format:
ca. 1150x750 mm

▼ GLATT

Farben:	Dicken:
07 beige	2 3 4 5 6 8 mm
27 hellblau	
81 schwarz	
70 gelb	2 3 4 6 8 mm

▼ PERFORIERT

Farbe:	Dicken:
07 beige	3 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Polstermaterial für Weichbettungs-Einlagen im Orthopädiemaßschuh und im Konfektionsschuh, für Polsteraufbau bei Fußbettungen, für Polsterlagerung des Fersenspornes.

Eigenschaften:

sehr gute Polstereigenschaften, hohes Rückstellvermögen. Abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur. Sehr gute Reißfestigkeit.


Verarbeitungshinweise:

leicht zu verkleben (Polychloropren). Thermoformbar bei 110° – 130° C.

nora® Lunatec EP EVA-Leichtzellplatten, glatt



302 creme



350 mint

Härte:
ca. 23 Shore A

Dichte:
ca. 0,21 g/cm³

Format:
ca. 880 x 590 mm

Farben:	Dicken:
302 creme	2 3 4 6 8 mm
350 mint	

Einsatzmöglichkeiten:

Polsterplatten im Innenschuhbereich. Für Formelemente bei mittlerer Beanspruchung, z.B. Wadenersatzstücke, als Obermaterial für Interims-, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich.

Eigenschaften:

hochelastisch, besonders hohe Rückstellfähigkeit, geringer Volumenverlust, glatte Oberfläche, geschlossenzellig, langlebig, hygienisch abwaschbar.


Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, horizontale Verformung darf dabei nicht auftreten. Thermoformbar bei 110° – 130° C.

► Besondere Eigenschaften für hygienischen Einsatz

nora® Lunatec EP ist ein EVA Material, das durch weitere hochwertige Rohstoffe ergänzt wurde und damit neue hervorragende Eigenschaften aufweist. Das Material verfügt über eine geschlossene Zellstruktur und eine besonders hohe Rückstellfähigkeit bei einem spezifisch leichten Gewicht. Anders als bei offenzelligen Materialien aus Polyurethan (PU) können Schweiß, Wundsekrete und andere Feuchtigkeit nicht in das Material eindringen, sondern lassen sich hygienisch an der Oberfläche entfernen.

nora® Lunatec motion EVA-Leichtzellplatten, glatt, randbeschlagen



06 seide



56 steingrau

Härte:

ca. 12 Shore A

Dichte:

ca. 0,13 g/cm³

Format:

ca. 1100x700 mm

Farben:

06 seide
56 steingrau

Format:

ca. 1400x1100 mm

Farbe:

06 seide

Dicken:

2 | 3 | 4 | 6 | 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich, als Oberschicht oder zur Punktentlastung; vor allem für Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder empfindliche Diabetiker-Füße. Als Polsterung im klassischen Orthesenbau oder zur funktionellen Auskleidung von Lagerungsorthesen oder Korsetts. Besonders geeignet für druckempfindliche Bereiche, um Schmerzen durch die Minimierung von Scherkräften zu reduzieren.

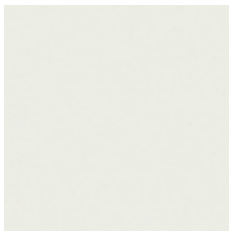
Eigenschaften:

nimmt Scherkräfte in der Bewegung auf und bettet extrem weich. Kann zur Schmerzreduktion beitragen und für neues Vertrauen bei Schmerzpatienten sorgen. Sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigenschaften, auch in der horizontalen Belastungsrichtung. Optimale Druckverteilung. Hygienisch geschlossenzellig und abwaschbar.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Weichheit des Materials anpassen. Thermoformbar bei 110° – 130° C.

nora® Lunatec motion 20 EVA-Leichtzellplatten, glatt, randbeschlagen



382 weiß

Härte:

ca. 20 Shore A

Dichte:

ca. 0,18 g/cm³

Format:

ca. 830x615 mm

Farbe:

382 weiß

Dicken:

2 | 3 | 4 | 6 | 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich, als Oberschicht, für Sandwichbauweise oder zur Punktentlastung; vor allem für Patienten > 100 kg mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder empfindliche Diabetiker-Füße. Als Polsterung im klassischen Orthesenbau oder bei der Amputationsversorgung. Besonders geeignet für Weichbettungseinlagen und druckempfindliche Bereiche, um Schmerzen zu reduzieren.

Eigenschaften:

nimmt Scherkräfte in der Bewegung auf und bettet weich. Kann zur Schmerzreduktion beitragen und für neues Vertrauen bei Schmerzpatienten sorgen. Sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigenschaften, auch in der horizontalen Belastungsrichtung. Optimale Druckverteilung. Hygienisch geschlossenzellig und abwaschbar.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Weichheit des Materials anpassen. Thermoformbar bei 110° – 130° C.

nora® Astro med 10 Leichtzellkautschuk



316 vanilla

Härte:

ca. 10 Shore A

Dichte:

ca. 0,27 g/cm³

Format:

ca. 1050x700 mm

Farbe:

316 vanilla

Dicken:


2 | 3 | 4,5 | 6 | 9 mm

Verarbeitungshinweise: im Gegensatz zu nora® EVA-Materialien ist nora® Astro med 10 nicht thermisch verformbar und wird kalt verklebt.

Einsatzmöglichkeiten:

Polsterung in der Orthetik und Prothetik, Fersen- und Vorfußpolster, durchgehende obere Polsterschicht einer Einlage, Fersensporenvertiefungen bei Fersensporen-Einlagen, Schaftpolster bei z.B. Peroneus- oder Knöchelkappe.

nora® Astro form 8 Leichtzellkautschuk, randbeschlagen



318 eisblau

Dichte:

ca. 0,21 g/cm³

Format:

ca. 770x560 mm

Farbe:

318 eisblau

Dicken:

2|3|4|6|8 mm


Einsatzmöglichkeiten:

Polsterung in der Orthetik und Prothetik, z.B. Polster im Vorfußersatz, Fersen- und Vorfußpolster, Haglund-Fersenpolster, Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettung, Fersensporenvertiefungen bei Fersensporen-Einlagen, Schaftpolster bei z.B. Peroneus- oder Knöchelkappe.

Eigenschaften:

- ▶ extreme Weichheit
- ▶ hohe Rückstellfähigkeit nach Kompression
- ▶ geringe Komprimierung
- ▶ hervorragende Polstereigenschaften
- ▶ optimale Stoßdämpfung
- ▶ thermoplastisch formbar bei ca. 110° – 130° C
- ▶ hygienisch & desinfizierbar durch geschlossenzellige Oberfläche
- ▶ geprüfte & zertifizierte Hautverträglichkeit durch das Institut Dermatest
- ▶ hervorragende Klebeeigenschaften

nora® Astro form 15 Leichtzellkautschuk, randbeschlagen



339 himmelblau

Härte:

ca. 15 Shore A

Dichte:

ca. 0,32 g/cm³

Format:

ca. 840x520 mm

Farbe:

339 himmelblau

Dicken:

2|3|4|6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Polsterung in der Orthetik und Prothetik, z.B. Polster im Vorfußersatz, Fersen- und Vorfußpolster, Haglund-Fersenpolster, Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettung, Fersensporenvertiefungen bei Fersensporen-Einlage, Schaftpolster bei z.B. Peroneus- oder Knöchelkappe.

Eigenschaften:

- ▶ besondere Weichheit
- ▶ hohe Rückstellfähigkeit nach Kompression
- ▶ geringe Komprimierung
- ▶ sehr gute Polstereigenschaften
- ▶ thermoplastisch formbar bei ca. 110° – 130° C
- ▶ hygienisch & desinfizierbar durch geschlossenzellige Oberfläche
- ▶ geprüfte & zertifizierte Hautverträglichkeit durch das Institut Dermatest
- ▶ lässt sich gut stanzen
- ▶ hervorragende Klebeeigenschaften

▶ Exzellente Rückstellfähigkeit und geschlossene Zellstruktur

Das Material **nora® Astro form** ist ein Leichtzellkautschuk, der in der Zusammensetzung seiner Eigenschaften einzigartig ist. Es ist sehr weich, rückstellfähig und bleibt dennoch in Form! Mit **nora® Astro form 8** und **nora® Astro form 15** gibt es dieses Material in zwei Abstufungen. Beide sind geschlossenzellig, hygienisch abwaschbar, optimal thermoplastisch verformbar und verfügen auch nach der Verarbeitung über eine besondere Weichheit, hohe Dauerelastizität und Rückstellfähigkeit.

Während **nora® Astro form 8** so weich ist, dass die Härte nach Shore A kaum noch messbar ist, ist **nora® Astro form 15** mit

einer Härte von ca. 15 Shore A und einer Dichte von 0,32 g/cm³ fester und straffer und bietet eine noch höhere Rückstellfähigkeit. Je nach Belastung, Verwendung und Einsatzbereich, kann der Verarbeiter zwischen diesen beiden Abstufungen wählen.

Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß und damit von Keimen, Bakterien und Pilzen in das Material und an der Oberfläche haftende Sekrete können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln hygienisch entfernt werden.

nora® Aero sorb M Leichtzellkautschuk, randbeschlagen



319 samtrot

Weichheit:

M = mittel

Dichte:

ca. 0,16 g/cm³

Format:

ca. 800 x 550 mm

Farbe:

319 samtrot

Dicken:

2 | 3 | 4 | 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Schmetterlingsrolle, Schmetterlingsentlastung, Haglund-Fersenpolster, Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettung, Fersensporenvertiefungen bei Fersensporen-Einlage, punktuelle Druckentlastung, Polsterung in der Orthetik und Prothetik.

Eigenschaften:

- ▶ extreme Weichheit
- ▶ bettende und gleichzeitig dämpfende Eigenschaften
- ▶ verzögerte Rückstellfähigkeit
- ▶ schockabsorbierend
- ▶ hervorragende Bettungseigenschaften zur Druckverteilung
- ▶ thermoplastisch formbar bei ca. 110° – 130° C
- ▶ hygienisch & desinfizierbar durch geschlossenzellige Oberfläche
- ▶ geprüfte & zertifizierte Hautverträglichkeit durch das Institut Dermatest
- ▶ hervorragende Klebeeigenschaften

nora® Aero sorb W Leichtzellkautschuk, randbeschlagen



325 lindgrün



338 schiefer

Weichheit:

W = weich

Dichte:

ca. 0,16 g/cm³

Format:

ca. 820 x 580 mm

Farben:

325 lindgrün

338 schiefer

Dicken:

2 | 3 | 4 | 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Schmetterlingsrolle, Schmetterlingsentlastung, Haglund-Fersenpolster, Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettung, Fersensporenvertiefungen bei Fersensporen-Einlage, punktuelle Druckentlastung, Polsterung in der Orthetik und Prothetik.

Eigenschaften:

- ▶ extreme Weichheit
- ▶ bettende und gleichzeitig dämpfende Eigenschaften
- ▶ verzögerte Rückstellfähigkeit
- ▶ schockabsorbierend
- ▶ hervorragende Bettungseigenschaften zur Druckverteilung
- ▶ thermoplastisch formbar bei ca. 110° – 130° C
- ▶ hygienisch & desinfizierbar durch geschlossenzellige Oberfläche
- ▶ geprüfte & zertifizierte Hautverträglichkeit durch das Institut Dermatest
- ▶ hervorragende Klebeeigenschaften

▶ Extrem weiches Material mit verzögerter Rückstellung und geschlossener Zellstruktur

nora® Aero sorb ist ein Material, das extrem weich und aufgrund seiner ausgeprägten verzögerten Rückstellung ebenso schockabsorbierend ist. nora® Aero sorb ist damit für Einsatzbereiche geeignet, die druckfrei sein müssen oder bei denen der Druck punktueller Belastungen optimal verteilt werden soll.

nora® Aero sorb ist ein Leichtzellkautschuk, der in der Zusammensetzung seiner Eigenschaften einzigartig ist und mit

seinen dämpfenden Eigenschaften für eine ideale Schmerzlinderung sorgen kann.

Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß und damit von Keimen, Bakterien und Pilzen in das Material und an der Oberfläche haftende Sekrete können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln hygienisch entfernt werden.

Natürlich ökologisch wertvoll:

LUNATUR WALNUT SORTIMENT

Die weltweite Jahresproduktion an Walnüssen liegt bei ca. 1,5 Millionen Tonnen, Tendenz steigend. Sie schmecken gut und der gesundheitliche Nutzen der Früchte ist natürlich bekannt. Die Walnuss hat den unter den Nüssen höchsten Gehalt einer für das Herz gesunden Omega-3-Fettsäure sowie wertvolle Inhaltsstoffe wie Zink, Magnesium, Eisen, Kalium und zahlreiche Vitamine. Den Früchten wird außerdem eine schützende Wirkung gegenüber Diabetes, Herz-Kreislaufkrankungen und Krebs nachgesagt.



Aber was passiert eigentlich mit den Tonnen an Schalen dieser wertvollen Nuss?

Mit Blick auf eine nachhaltige und ökologisch bewusste Weiterentwicklung der EVA-Produkte, hat sich nora dieses Naturprodukt zu Nutze gemacht, um ein Material-Sortiment zu entwickeln, aus dem eine ökologisch wertvolle Fußbettung oder Einlage hergestellt werden kann ...

Die Produkte des **nora® Lunatur Walnut Sortiments** bestehen zu einem bedeutenden Teil aus fein gemahlene Walnussschalen. Damit wird ein natürlich nachwachsender Rohstoff verwendet, ohne in eine Lebensmittelkette einzugreifen. Ziel dieser Entwicklung war es, ein natürliches Abfallprodukt sinnvoll zu nutzen und das EVA-Material mit einem wertvollen Naturprodukt zu veredeln.

Das Ergebnis sind **hochwertige EVA-Materialien** mit unterschiedlichen Eigenschaften, die zudem für ein angenehmes Fußklima sorgen. Die geschlossene Zellstruktur des Materials verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß und damit von Keimen, Bakterien und Pilzen. Die an der Oberfläche haftenden Sekrete können also mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel hygienisch entfernt werden.



nora® Lunatur 18 Walnut EVA-Leichtzellplatten, glatt



340 walnuss

Härte: ca. 18 Shore A	Eigenschaften: bettende Polstereigenschaften
Dichte: ca. 0,12 g/cm ³	
Format: ca. 1000x730 mm	
Farbe: 340 walnuss	Dicken: 2 3 4 6 8 mm

nora® Lunatur 27 Walnut EVA-Leichtzellplatten, glatt



340 walnuss

Härte: ca. 27 Shore A	Eigenschaften: dauerelastische Polstereigenschaften
Dichte: ca. 0,23 g/cm ³	
Format: ca. 830x585 mm	
Farbe: 340 walnuss	Dicken: 2 3 4 6 8 mm

nora® Lunatur 50 Walnut EVA-Leichtzellplatten, glatt




340 walnuss

Härte: ca. 50 Shore A	Eigenschaften: stabilisierende Eigenschaften
Dichte: ca. 0,34 g/cm ³	
Format: ca. 900x550 mm	
Farbe: 340 walnuss	Dicken: 2 3 4 6 8 mm

Verbundplatten

nora® Lunatur combi CW EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

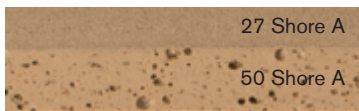Die vulkanisierte Verbindung von:



ca. 14 mm

Format: ca. 1100x840 mm

nora® Lunatur combi CW besteht aus nora® Lunatur 27 Walnut und nora® Lunatec cork H (EVA-Schicht mit hohem Korkanteil) und ist die optimale Basis für ökologisch wertvolle, orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgungen mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion, um z.B. Fehlstellungen des Bewegungsapparates durch Knick/Senkfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß zu korrigieren.

nora® Lunatur 27 Walnut
dauerelastische Polstereigenschaften

Härte: ca. 27 Shore A	
Dichte: ca. 0,23 g/cm ³	
Farbe: 340 walnuss	Dicke: ca. 6 mm

nora® Lunatec cork H
stabilisierende Eigenschaften

Härte: ca. 50 Shore A	
Dichte: ca. 0,35 g/cm ³	
Farbe: 205 kork	Dicke: ca. 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

nora® Lunatur combi CW verfügt über eine sehr gute Kantenstabilität für schalige Einlagen und lässt sich sehr gut schleifen und verkleben. Je nach Schwierigkeit und Art der Versorgung kann **Lunatur combi CW** durch ein weiteres festes, stabilisierendes Material wie z.B. **Norit**, **Lunacell** oder **Lunatur 50 Walnut** oder durch ein weichpolsterndes oder bettendes Material wie z.B. **Lunatur 18 Walnut** oder **Lunatur 27 Walnut** an Ferse und Vorfuß ergänzt werden.

Verarbeitungshinweise:

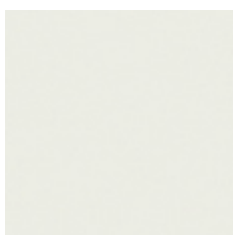
thermoformbar bei 110° – 130° C.

Aufbau- und Polsterplatten


nora® Lunasoft SLW EVA-Leichtzellplatten, glatt




07 beige



09 weiß

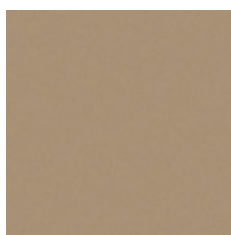


17 graubeige

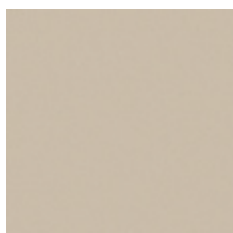

19 stein



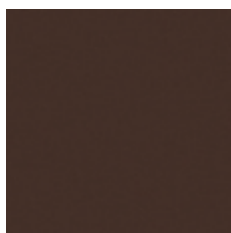
35 mittelbraun



46 dunkelbraun



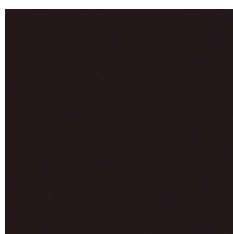56 steingrau



81 schwarz



89 rot



111 royalblau



351 petrol

Härte:

ca. 30 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Format:

ca. 1150x750 mm

Farben:

07 beige
81 schwarz
09 weiß
17 graubeige
19 stein
35 mittelbraun
46 dunkelbraun
56 steingrau
89 rot
111 royalblau
351 petrol

Dicken:

2|3|4|5|6|8|10|12|
sowie 14|20 mm
2|3|4|6|8|10|20 mm

Einsatzmöglichkeiten:

als Polster- und Dämpfungsmaterial für Einlagen, für Fußbettungen und Sporteinlagen, als Obermaterial für Interims- und Badeschuhe, als Formelement z. B. elastische Kappen oder als Softsocket.

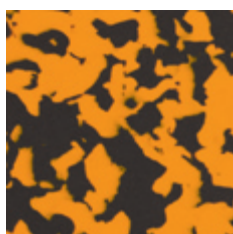
Eigenschaften:

leicht, formstabil, flexibel und elastisch; abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise:

thermoformbar bei 110°–130° C.

nora® Lunasoft SLW trendline EVA-Leichtzellplatten, glatt



4462 anthrazit-orange

Härte:

ca. 30 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Format:

ca. 1300x900 mm

Farbe:


4462 anthrazit-orange

Dicken:


2|3 mm

nora® Lunasoft SLW trendline ist eine gemusterte Variante von nora® Lunasoft SLW.

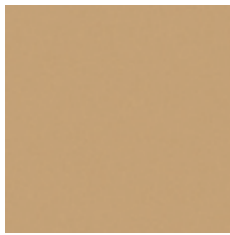
nora® Lunasoft SL EVA-Leichtzellplatten, glatt




07 beige

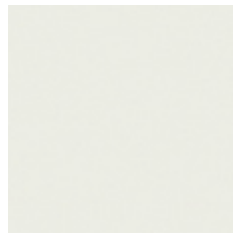

09 weiß

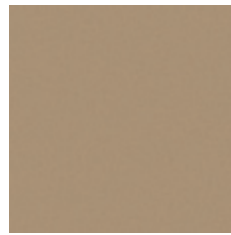


17 graubeige

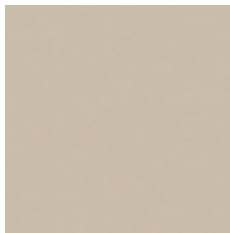


19 stein



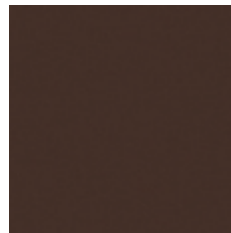35 mittelbraun




46 dunkelbraun

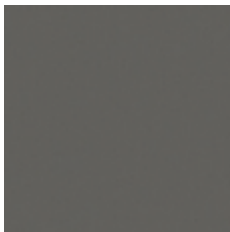

56 steingrau



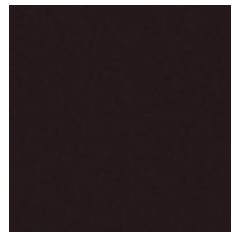78 dunkelblau



81 schwarz

Härte:

ca. 40 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Format:

ca. 1140x740 mm

Farben:

07 beige

09 weiß

46 dunkelbraun

81 schwarz

17 graubeige

19 stein

35 mittelbraun

56 steingrau

78 dunkelblau

Dicken:

2|3|4|5|6|8|10|12|20

2|3|4|6|8|10|12|

sowie 14|20 mm

2|3|4|6|8|10|20 mm

nora® Lunasoft SL sind sehr leichte, glatte EVA-Leichtzellplatten, die als Aufbau- und Polsterplatten sowie als Abdeckplatten verwendet werden.

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen, Einlagen, Sporteinlagen, Softsockets und Formelemente verschiedenster Art.

Eigenschaften:

leicht, elastisch und formstabil, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort. Abwaschbar und hygienisch aufgrund geschlossener Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung. Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen, thermoformbar bei 110°–130° C.

nora® Lunasoft SL color EVA-Leichtzellplatten, glatt



65 blau



69 orange



70 gelb



89 rot



98 grün



111 royalblau



348 limette



349 brombeere

Härte:

ca. 40 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Format:

ca. 1140x740 mm

Farben:

65 blau

69 orange

70 gelb

89 rot

98 grün

111 royalblau

348 limette

349 brombeere

Dicken:

2|3|4|6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen, Einlagen, Sporteinlagen und Formelemente. Zum Abdecken von Einlagen, als Zwischensohlenmaterial bei Kinderschuh und zum universellen und hautfreundlichen Kaschieren von Flächen oder die Außenschale eines 2-Schichtsockets.

Eigenschaften:

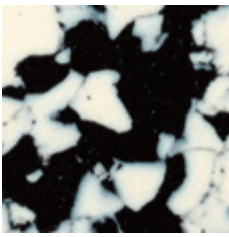
leicht, elastisch, formstabil. Abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur.

Verarbeitungshinweise:


thermoformbar bei 110°–130° C.

Aufbau- und Polsterplatten

nora® Lunasoft SL color plus / quattro EVA-Leichtzellplatten, glatt



0281 weiß-schwarz

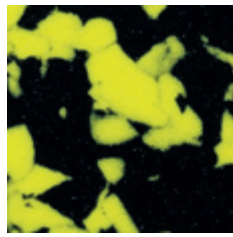


9581 citro-schwarz



9681 pink-schwarz



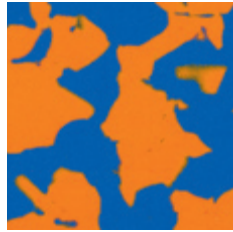3981 lila-schwarz



4457 orange-blau



4444 vierfarbig


Härte:
ca. 40 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³


Format:
ca. 1280x890 mm

Farben:	Dicken:
0281 weiß-schwarz	2 3 mm
9581 citro-schwarz	
9681 pink-schwarz	
3981 lila-schwarz	
4457 orange-blau	
4444 vierfarbig	

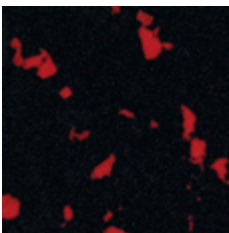
nora® Lunasoft SL trendline EVA-Leichtzellplatten, glatt



4450 schwarz-rot

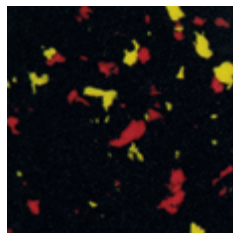

4451 schwarz-rot-gelb

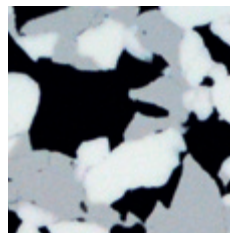

4463 camoufflage



4445 korkoptik

Härte:
ca. 40 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³


Format:
ca. 1280x890 mm

Farben:	Dicken:
4450 schwarz-rot	2 3 mm
4451 schwarz-rot-gelb	
4463 camoufflage	
4445 korkoptik	

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen, Einlagen, Sporteinlagen und Formelemente. Zum Abdecken von Einlagen, als Zwischensohlenmaterial und zum universellen und hautfreundlichen Kaschieren von Flächen oder die Außenschale eines 2-Schichtsockets.

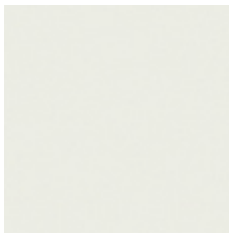nora® Lunatec SE EVA-Leichtzellplatten, glatt



09 weiß



137 terra

Härte:

ca. 45 Shore A

Dichte:

ca. 0,29 g/cm³

Format:

ca. 920 x 590 mm

Farben:

09 weiß

137 terra

Dicken:

6 | 10 | 14 mm

nora® Lunatec SE ist eine stabile und elastische EVA Leichtzellplatte, die vor allem als Aufbau- material für Sport- und Straßenschuhe sowie orthopädische Versorgungen hervorragend geeignet ist. Hohes Rückstellvermögen und Elastizität, bei gleichzeitig hoher Formstabilität, zeichnen dieses hochwertige Aufbaumaterial aus.

Einsatzmöglichkeiten:

für Einlagen, Sporeinlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, z. B. zur Abstützung des Rückfußes, für Formelemente (z. B. bei Arthrosen, Knöchel-, Lähmungskappen und halb- steifen Laschen) oder für Interims- und Bade- schuhe als Obermaterial.

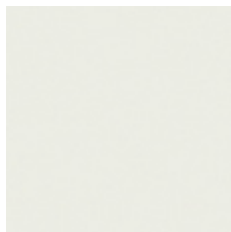
Verarbeitungshinweise:

thermoformbar bei 120° – 170° C, formbar im Einblockverfahren (bei Fußbettungen).


nora® Lunasoft AL EVA-Leichtzellplatten, glatt




07 beige




09 weiß

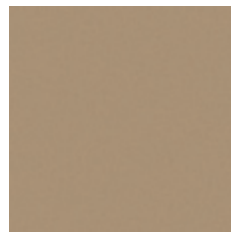


17 graubeige

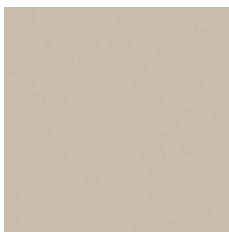


19 stein

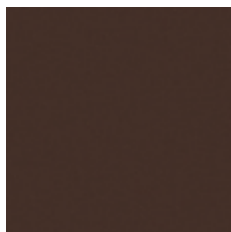

46 dunkelbraun

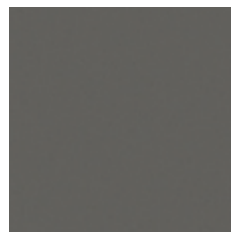

56 steingrau

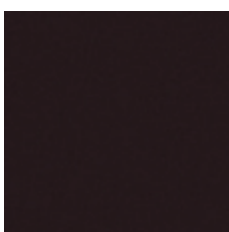

81 schwarz

Härte:

ca. 53 Shore A

Dichte:

ca. 0,26 g/cm³

Format:

ca. 920 x 560 mm

Farben:

07 beige

17 graubeige

19 stein

56 steingrau

09 weiß

46 dunkelbraun

81 schwarz

Dicken:

6 | 10 | 20 mm

6 | 8 | 10 | 20 mm

6 | 10 | 14 | 20 mm

6 | 8 | 10 | 14 | 20 mm

nora® Lunasoft AL ist eine leichte und stabile EVA Leichtzellplatte, die vor allem als Aufbau- material für Sport- und Freizeitschuhe und flexible Straßenschuhe hervorragend geeignet ist. Geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität zeichnen dieses hochwertige Aufbaumaterial aus.

Einsatzmöglichkeiten:

für Einlagen, Sporeinlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, z. B. zur Abstützung des Rückfußes.

Verarbeitungshinweise:

thermoformbar bei 120° – 170° C.

Aufbau- und Polsterplatten

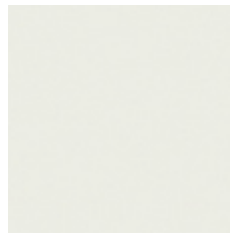
nora® Lunalight A EVA-Leichtzellplatten, glatt




05 hellbeige




07 beige



09 weiß

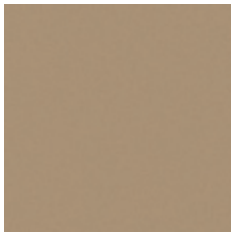

17 graubeige

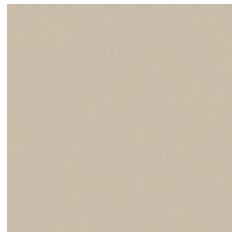


19 stein



35 mittelbraun



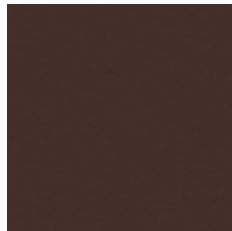
41 blassbraun



46 dunkelbraun



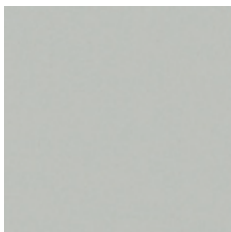56 steingrau




60 hellgrau



78 dunkelblau



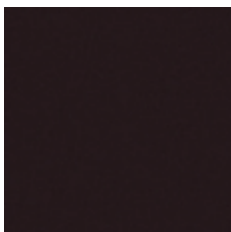80 anthrazit



81 schwarz



89 rot



352 jeansblau

Härte:

ca. 60 Shore A

Dichte:

ca. 0,35 g/cm³

Format:

ca. 860x550 mm

Farben:

07 beige
09 weiß
17 graubeige
19 stein
46 dunkelbraun
56 steingrau
60 hellgrau
78 dunkelblau

Dicken:

4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 mm

05 hellbeige
35 mittelbraun
41 blassbraun
80 anthrazit
89 rot
352 jeansblau

6 | 8 | 10 | 20 mm

81 schwarz

3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
sowie 16 | 20 | 24 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Aufbauplatten, für Abrollsohlen (für Schmetterlings- oder Ballenrollen), für Außen- und Innenranderhöhungen, für Zwischensohlen, für Schalenböden.

Eigenschaften:

besonders hart und steif, formstabil.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung, thermoformbar bei 120° – 170° C.

nora® Lunacell EVA-Leichtzellplatten, glatt und perforiert



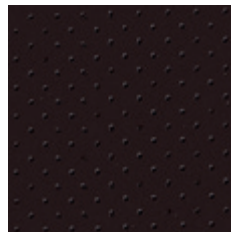
07 beige
glatt



81 schwarz
glatt



07 beige
perforiert



81 schwarz
perforiert

Einsatzmöglichkeiten:

Abdeckmaterial für glatte oder verformte Einlagen. Aufbauplatten für Arbeitsschuhwerk mit hoher Beanspruchung, für Flügelabsätze mit Lotaufbau, für Damenblockabsätze, für Keilböden, für Zwischensohlen und Stabilisierungsteile; für Einlagen als hochbelastbares versteifendes Element.

Härte:
ca. 68 Shore A

Dichte:
ca. 0,37 g/cm³

▼ GLATT

Format:
ca. 850 x 540 mm

Farben:	Dicken:
07 beige	2 3 4 5 6 8 10 12 mm
81 schwarz	10 20 mm

▼ GLATT UND PERFORIERT

Format:
ca. 1080 x 850 mm

Farben:	Dicke:
07 beige	1,5 mm
81 schwarz	

Eigenschaften:

tritt-, kratz- und reißfest, hochstabil und unempfindlich gegenüber Verformung, besonders hart und steif, lässt sich hervorragend ausputzen. Besonders formstabil für dünne Einlagen.

Verarbeitungshinweise:

EVA-übliche Verklebung, thermoformbar bei 120° – 170° C, je nach Dicke.

nora® Norit L Hartzellplatten, glatt



336 sandfarben

Härte:
ca. 93 Shore A

Dichte:
ca. 0,90 g/cm³

Format:
ca. 1000 x 800 mm

Farbe:	Dicken:
336 sandfarben	2 3 mm

Eigenschaften:

hohe Formbeständigkeit und Elastizität, sehr gutes Dauerbiegeverhalten, lässt sich hervorragend anformen, nähen, stanzen, fräsen und samtig schleifen.

Verarbeitungshinweise:

sehr gut zu verkleben, thermoformbar bei 110° - 130° C; gut abkühlen lassen.

nora® Norit Hartzellplatten, glatt



25 lederfarben

Härte:
ca. 95 Shore A

Dichte:
ca. 1,00 g/cm³

Format:
ca. 1000 x 795 mm

Farbe:	Dicken:
25 lederfarben	2 3 mm

Eigenschaften:

hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Sehr gutes Dauerbiegeverhalten, lässt sich hervorragend nähen, stanzen, fräsen und schärfen. Mehrfach verwendbar.

Verarbeitungshinweise:

leicht zu verkleben mit Polychloroprenkleber, thermoformbar bei 120° – 150° C.

Einsatzmöglichkeiten:

Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen, Hinterkappen und Brandsohlen; als Zwickzugabe oder für die Leistenreparatur. Außerdem ideal als Platzhalter auf dem Leisten einsetzbar.

► **nora® Lunatec combi Platten sind vulkanisierte Verbindungen bewährter nora® Qualitäten.**
Dauerhaft verbunden ...



nora® Lunatec combi ist eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Verbundplatten: zwei bis drei unterschiedliche Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert und bieten sicheren Halt, ohne Verklebung.

nora® Lunatec combi ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik.

Dauerhaft verbunden ... heißt auch für Sie:

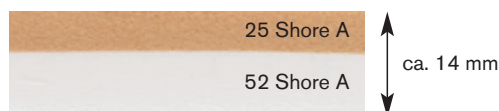
- kein Verkleben notwendig
- keine Verschiebung der unterschiedlichen Materialien beim Bearbeiten
- ein höherer Volumenerhalt, da mindestens ein Tiefziehvorgang entfällt
- die Verbundplatten sind bei 120° – 130° C thermisch formbar
- weitere Vorteile gegenüber verklebten Produkten:
keine Blasenbildung an der Verbundstelle und
keine Verhärtungen durch eine Klebeschicht.

Profitieren Sie von der effizienteren Einlagenherstellung durch Zeit- und Kostenersparnis.

Je nach Diagnose, Krankheitsbild und Gewicht der Patienten, kommen in der Praxis unterschiedliche Materialkombinationen zum Einsatz. Wir haben zahlreiche verschiedene Kombinationen aus Materialien mit bettender, dauerelastischer oder stabilisierender Funktion für Sie bereits verbunden. **Sie** entscheiden, welche Verbundplatte im Einzelfall die geeignete ist und durch welchen Aufbau von zusätzlichen Materialien die optimale Versorgung erreicht wird.

nora® Lunatec combi 1 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 925 x 580 mm

nora® Lunalastik

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,23 g/cm³

Farbe: 07 beige **Dicke:** ca. 6 mm

nora® Lunasoft AL

stabilisierende Eigenschaften

Härte:
ca. 52 Shore A

Dichte:
ca. 0,26 g/cm³

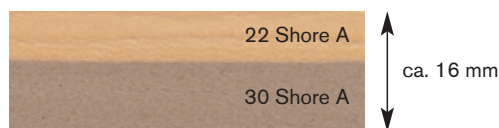
Farbe: 09 weiß **Dicke:** ca. 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen. Für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, aber auch als Basis für Sporteinlagen geeignet.

nora® Lunatec combi 2 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 880 x 600 mm

nora® Lunairflex

bettende Polstereigenschaften

Härte:
ca. 22 Shore A

Dichte:
ca. 0,12 g/cm³

Farbe: 07 beige **Dicke:** ca. 6 mm

nora® Lunasoft SLW

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

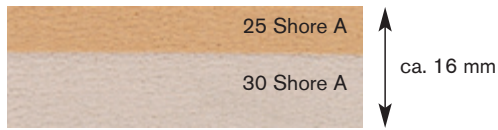
Farbe: 17 graubeige **Dicke:** ca. 10 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion. Bestens geeignet für leichte Beanspruchung bei empfindlichen Füßen (z.B. Altersfuß), Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium.

nora® Lunatec combi 3 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 870 x 580 mm

nora® Lunalastik

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,23 g/cm³

Farbe: 07 beige **Dicke:** ca. 6 mm

nora® Lunasoft SLW

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

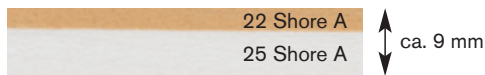
Farbe: 19 stein **Dicke:** ca. 10 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen mit dauerelastischer Funktion, bestens geeignet für mittlere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma im fortgeschrittenen Stadium.

nora® Lunatec combi 4 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 870 x 540 mm

nora® Lunairflex

bettende Polstereigenschaften

Härte:
ca. 22 Shore A

Dichte:
ca. 0,12 g/cm³

Farbe: 07 beige **Dicke:** ca. 3 mm

nora® Lunalastik

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,23 g/cm³

Farbe: 09 weiß **Dicke:** ca. 6 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für orthopädische Fußbettungen, insbesondere diabetesadaptierte Fußbettungen, mit bettender und zugleich dauerelastischer Funktion, bestens geeignet für stärkere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma im fortgeschrittenen Stadium. Die Kombination mit einem stabilisierenden Material, z.B. Lunasoft AL, Lunalight A oder Lunacell ist sinnvoll.

nora® Lunatec combi 5 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 950 x 600 mm

nora® Lunalastik

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,23 g/cm³

Farbe: 60 hellgrau **Dicke:** ca. 3 mm

nora® Lunasoft SLW

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

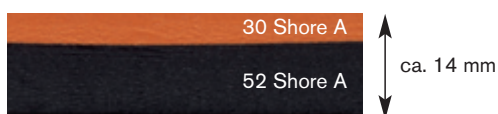
Farbe: 111 royalblau **Dicke:** ca. 4 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für effizient gefertigte dünne, dauerelastische Einlagen, z.B. eine langsohlige Einlage mit optimaler Weichbettung im Vorfuß. Zur Abpolsterung von Orthesen, Prothesen und Softsockets geeignet.

nora® Lunatec combi 6 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 880 x 560 mm

nora® Lunasoft SLW

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

Farbe: 137 terra **Dicke:** ca. 4 mm

nora® Lunasoft AL

stabilisierende Eigenschaften

Härte:
ca. 52 Shore A

Dichte:
ca. 0,26 g/cm³

Farbe: 81 schwarz **Dicke:** ca. 10 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlage oder Fußbettung, z.B. langsohlige Sporteinlage.

nora® Lunatec combi 7 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 1180x840 mm

nora® Lunasoft SLW

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:

ca. 30 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Farbe:

07 beige

Dicke:

ca. 3 mm

nora® Lunasoft SL

stabilisierende Eigenschaften

Härte:

ca. 40 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Farbe:

19 stein

Dicke:

ca. 4 mm

Einsatzmöglichkeiten:

ideale Grundlage für die effiziente Anfertigung einer Einlage, eines Weichwand-innentrichters oder eines Softsockets. In Kombination mit anderen **nora® Luna-Produkten** ist dieses Material die perfekte Basis für eine orthopädische Fußbettung zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma.

nora® Lunatec combi 8 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 880x560 mm

nora® Lunatec EP

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:

ca. 22 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Farbe:

131 rot

Dicke:

ca. 4 mm

nora® Lunatec SE

stabilisierende Eigenschaften

Härte:

ca. 45 Shore A

Dichte:

ca. 0,28 g/cm³

Farbe:

81 schwarz

Dicke:

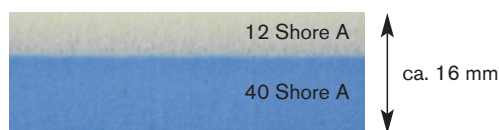
ca. 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für effizient gefertigte sportliche oder moderne Einlage oder Fußbettung mit hoher Rückstellkraft, z. B. dünne langsohlige Sporteinlage.

nora® Lunatec combi motion 1 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 1200x960 mm

nora® Lunatec motion

bettende Eigenschaften

Härte:

ca. 12 Shore A

Dichte:

ca. 0,13 g/cm³

Farbe:

06 seide

Dicke:

ca. 6 mm

nora® Lunasoft SL

stabilisierende Eigenschaften

Härte:

ca. 40 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Farbe:

27 hellblau

Dicke:

ca. 10 mm

Die obere Schicht aus **nora® Lunatec motion** ist extrem weich, um vor allem Füße mit schmerzenden Regionen weich zu betten und die Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung abzufangen, so dass es zu einer wesentlichen Entlastung des Bewegungsapparates und vorhandener Schmerzen kommt. Besonders hervorzuheben sind auch die **sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung**. Ziel einer Versorgung mit **nora® Lunatec motion** kann zum Beispiel sein, die Scherkräfte zwischen der Fußbettung und der Fußsohle auf ein Minimum zu reduzieren und so Schmerzen zu lindern. Das weiche Tragegefühl sorgt vor allem bei Schmerzpatienten für neues Vertrauen, trotz langwieriger Schmerzen, wieder bewusst aufzutreten.

Einsatzmöglichkeiten:

für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich; vor allem für Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder empfindliche Diabetiker-Füße. Besonders geeignet für druckempfindliche Bereiche, um Schmerzen durch die Minimierung von Scherkräften zu reduzieren.

nora® Lunatec combi cork 1 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 1120x880 mm

nora® Lunatec combi cork 1 ist eine vulkanisierte Verbundplatte deren stabilisierende EVA-Schicht einen hohen Korkanteil enthält. Damit ist diese Verbundplatte die ideale Grundlage für die Anfertigung einer langlebigen Einlage. Die samtig angeraute Oberfläche der dauerelastischen Polsterschicht ermöglicht zudem das optimale Aufbringen einer Lederdecke.

nora® Lunalastik

dauerelastische Polstereigenschaften

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,23 g/cm³

Farbe: 07 beige
Dicke: ca. 6 mm

nora® Lunatec cork H

stabilisierende Eigenschaften

Härte:
ca. 50 Shore A

Dichte:
ca. 0,35 g/cm³

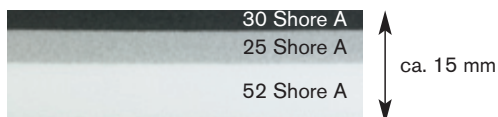
Farbe: 205 kork
Dicke: ca. 8 mm

Einsatzmöglichkeiten:

Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgung mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion, um z. B. Fehlstellungen des Bewegungsapparates durch Knick/Senkfuß, Spreizfuß oder Hohlfuß zu korrigieren. Je nach Schwierigkeit und Art der Versorgung kann nora® Lunatec combi cork 1 durch ein weiteres festes, stabilisierendes Material wie z.B. Norit, Lunacell oder Lunelight ergänzt werden.

nora® Lunatec combi T1 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 880x590 mm

Die 3-schichtige Verbundplatte nora® Lunatec combi T1 ist ein Material, das vor allem für die Versorgung von Rheumatikern und Krankheitsbildern mit besonders empfindlichen Füßen hervorragend geeignet ist. Das Besondere an nora® Lunatec combi T1 ist die Weichheit der mittleren Schicht. Eingebunden in zwei härtere Schichten, minimiert sie die auftretenden Scherkräfte und fängt sie in der Auftrittsbewegung ab, so dass es zu einer wesentlichen Entlastung beim Bewegungsablauf kommt.

nora® Lunasoft SLW

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

Farbe: 80 anthrazit
Dicke: ca. 3 mm

nora® Lunasoft Z

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,17 g/cm³

Farbe: 307 mittelgrau
Dicke: ca. 4 mm

nora® Lunasoft AL

Härte:
ca. 52 Shore A

Dichte:
ca. 0,26 g/cm³

Farbe: 09 weiß
Dicke: ca. 8 mm

Der besondere Aufbau dieser Verbundplatte bietet **sehr gute Polster- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung**. Dieser Effekt wird durch die Vulkanisation der Schichten erreicht. Die unterschiedlich harten Materialien sind in einem fließenden Übergang miteinander verbunden und es gibt keine Klebeschichten, die diese Funktion störend beeinträchtigen.

Einsatzmöglichkeiten:

Orthopädische Fußbettungen mit sehr guten Polster- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, insbesondere für Rheumatiker und Krankheitsbilder mit empfindlichen Füßen. Je nach Schwierigkeit und Art der Versorgung kann nora® Lunatec combi T1 durch ein weiteres festes, stabilisierendes Material wie z.B. Norit, Lunacell oder Lunelight ergänzt werden.

nora® Lunatec combi motion T2 EVA-Leichtzellplatten, randbeschlagen

NEU

Die vulkanisierte Verbindung von:



Format: ca. 1000x625 mm

Die 3-schichtige EVA-Verbundplatte nora® Lunatec combi motion T2 ist ein Material, das vor allem für die Versorgung von **schmerz- und druckempfindlichen Füßen** hervorragend geeignet ist. Die Materialzusammensetzung ist die ideale Kombination aus hoher Funktionalität, charakteristischer Weichheit und geringem Gewicht.

Die Deckschicht aus Lunatec motion nimmt Scherkräfte in der Bewegung auf und bettet **extrem weich**. Die sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften, auch in der horizontalen Belastungsrichtung, sorgen für eine **optimale Druckverteilung** und

nora® Lunatec motion

Härte:
ca. 12 Shore A

Dichte:
ca. 0,13 g/cm³

Farbe: 56 steingrau
Dicke: ca. 7 mm

nora® Lunasoft Z

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,16 g/cm³

Farbe: 345 grün
Dicke: ca. 5 mm

nora® Lunatec CAD 35

Härte:
ca. 35 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

Farbe: 60 hellgrau
Dicke: ca. 8 mm

Punktentlastung. So können vor allem Füße mit schmerzenden Regionen bestmöglich versorgt werden. Mit ihren **dauerelastischen** und **stabilisierenden** Eigenschaften sind die beiden unteren Schichten der ideale Aufbau für die Versorgung empfindlicher Füße. Die unterschiedlich weichen Schichten sind in einem fließenden Übergang miteinander verbunden.

Einsatzmöglichkeiten:

Aufgrund der Gesamtdicke von ca. 20 mm ist nora® Lunatec combi motion T2 optimal für die Anfertigung von dickeren orthopädischen Fußbettungen, Weichbettungseinlagen, diabetes-adaptierten Fußbettungen bzw. Bettungen für Verbandsschuhe geeignet. Die Fußbettungen können in einem Tiefziehvorgang zeit- und kostensparend, ohne den Einsatz von Klebstoff, gefertigt werden.

Fräsplatten

nora® Lunatec CAD 25 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen



07 beige

Härte:

ca. 25 Shore A

Dichte:

ca. 0,12 g/cm³

Formate:

ca. 1150x750 mm ca. 1500x1150 mm

Farbe:

07 beige

Dicken:

30 | 35 mm

nora® Lunatec CAD 30 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen



80 anthrazit

Härte:

ca. 30 Shore A

Dichte:

ca. 0,15 g/cm³

Formate:

ca. 1100x700 mm ca. 1400x1100 mm


Farbe:

80 anthrazit

Dicken:

30 | 35 mm

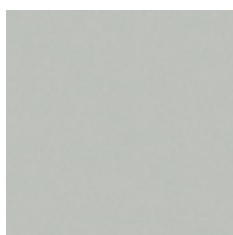nora® Lunatec CAD 35 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen



60 hellgrau

Härte:

ca. 35 Shore A

Dichte:

ca. 0,20 g/cm³

Formate:

ca. 1160x770 mm ca. 1540x1160 mm


Farbe:

60 hellgrau

Dicken:

30 | 35 mm

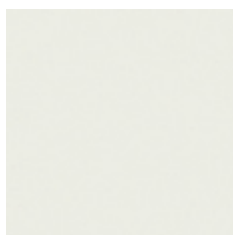nora® Lunatec CAD 45 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen



09 weiß

Härte:

ca. 45 Shore A

Dichte:

ca. 0,22 g/cm³

Formate:

ca. 1080x710 mm ca. 1420x1080 mm


Farbe:

09 weiß

Dicken:

30 | 35 mm

nora® Lunatec CAD 55 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen



318 eisblau

Härte:

ca. 55 Shore A

Dichte:

ca. 0,30 g/cm³

Formate:

ca. 1000x650 mm ca. 1300x1000 mm

Farbe:


318 eisblau

Dicken:

30 | 35 mm

nora® Lunatec combiCAD 1 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen

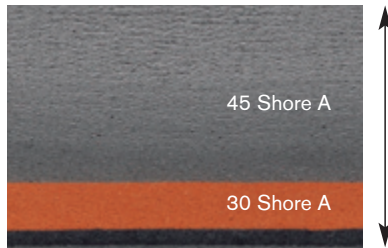Die vulkanisierte Verbindung von:



Formate: ca. 1120x740 mm
ca. 1480x1120 mm

nora® Lunatec CAD 45

Härte:
ca. 45 Shore A

Dichte:
ca. 0,22 g/cm³

Farbe: 56 steingrau **Dicke:** ca. 24 mm

nora® Lunasoft SLW

Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

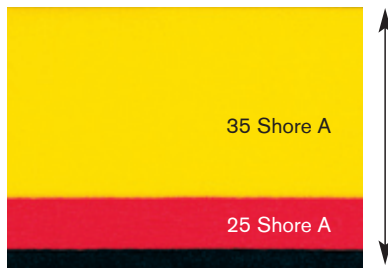
Farbe: 137 terra **Dicke:** ca. 6 mm

Stabilisierungsschicht

Farbe: 80 anthrazit **Dicke:** ca. 2 mm

nora® Lunatec combiCAD 2 EVA-Leichtzellplatten, Fräsmaterial, randbeschlagen

Die vulkanisierte Verbindung von:



Formate: ca. 1120x750 mm
ca. 1500x1120 mm

nora® Lunatec CAD 35

Härte:
ca. 35 Shore A

Dichte:
ca. 0,17 g/cm³

Farbe: 70 gelb **Dicke:** ca. 25 mm

nora® Lunasoft Z

Härte:
ca. 25 Shore A

Dichte:
ca. 0,16 g/cm³

Farbe: 131 rot **Dicke:** ca. 7 mm

Stabilisierungsschicht

Farbe: 81 schwarz **Dicke:** ca. 3 mm

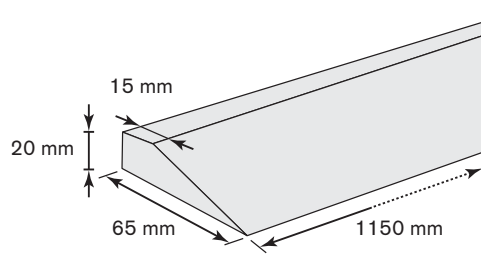
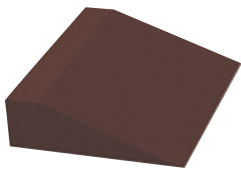
nora® Lunatec combiCAD 1 und 2 sind eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Fräsplatten. Drei unterschiedliche EVA-Leichtzellqualitäten werden im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert und bieten sicheren Halt, ohne Verklebung. Zielsetzung der Entwicklung war, das optimale Fräsverhalten und die hohen funktionellen Eigenschaften der nora® Lunatec CAD Materialien mit den enormen Vorteilen vulkanisierter Verbund-

platten zu kombinieren und damit eine optimierte Verarbeitung zu erzielen.

Beim Verarbeiten der nora® Fräsmaterialien wird der Unterschied deutlich: das Material lässt sich gut verarbeiten und die Werte für Reißdehnung, Zugfestigkeit und Wiedererholung sind hervorragend. Und es entstehen keine fühlbaren Absätze durch störende Klebeschichten.

Aufbaukeilstreifen

nora® Lunasoft SLW Keil EVA-Leichtzellkeilstreifen, glatt



Härte:
ca. 30 Shore A

Dichte:
ca. 0,20 g/cm³

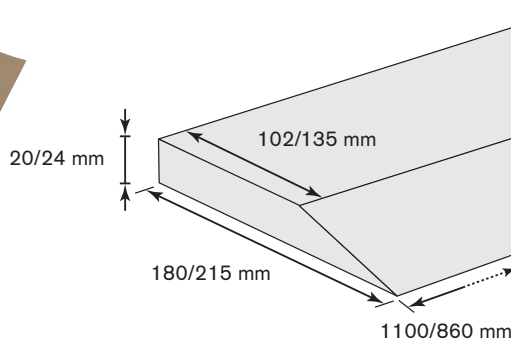
Format:
ca. 1150x65x20 mm

Farben:
46 dunkelbraun
81 schwarz

Eigenschaften:

sehr gute Dämpfungseigenschaften. Hoher Gehkomfort durch Kombination von niedriger Shore Härte und geringem Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.

nora® Lunelight K EVA-Leichtzellaufbaukeilstreifen, glatt



Härte:
ca. 60 Shore A

Dichte:
ca. 0,35 g/cm³

Format:
ca. 1100x180x20 mm

Farben:
09 weiß
17 graubeige
19 stein
35 mittelbraun
46 dunkelbraun
81 schwarz

Formate:
ca. 860x215x24 mm
ca. 860x215x20 mm

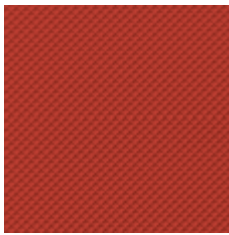
Farbe:
81 schwarz

Format:
ca. 1100x180x24 mm

Farben:
46 dunkelbraun
81 schwarz

nora® Lunelight K ist der ideale Keilstreifen für den wirtschaftlichen Absatzaufbau.

nora® Supersorb



82 ziegelrot

Härte:
ca. 28 Shore A

Dichte:
ca. 1,09 g/cm³

Format: ca. 780x525 mm
Profil: 13 Riffel

Farbe: 82 ziegelrot
Dicken: 2 | 4 | 5 mm

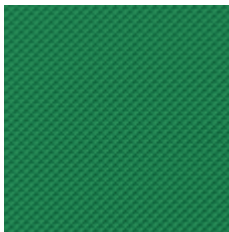
Einsatzmöglichkeiten:

zur Auftrittsdämpfung und Polsterung insbesondere für Sportschuhe sehr gut geeignet, Funktion ab ca. 300 kg Auftrittskraft. Sowohl dämpfende als auch elastische, polsternde Eigenschaften. Schockabsorption bei 5 mm Dicke: ca. 95%.

Verarbeitungshinweise:

leicht geraut mit Polychloroprenkleber verkleben. Beim Rauhen oder Schleifen nur leicht an das Schleifband andrücken. Um die viskoelastischen Eigenschaften des Materials in allen Richtungen voll ausnutzen zu können, sollte nach Möglichkeit nicht vollflächig verklebt werden.

nora® Orthosorb



98 grün

Härte:
ca. 20 Shore A

Dichte:
ca. 1,09 g/cm³

Format: ca. 780x525 mm
Profil: 13 Riffel


Farbe: 98 grün
Dicken: 2 | 3 | 4 mm

Einsatzmöglichkeiten:

zur Auftrittsdämpfung und Polsterung insbesondere für orthopädische Schuhe sehr gut geeignet. Gegenüber **nora® Supersorb** sorgt bei **nora® Orthosorb** eine geringere Dämpfung für eine bessere Polsterung und eine höhere Elastizität, bis ca. 300 kg Auftrittskraft. Das entspricht einer Gehbelastung einer ca. 80kg schweren Person. Schockabsorption bei 4 mm Dicke: ca. 83 %.

Puffergummi

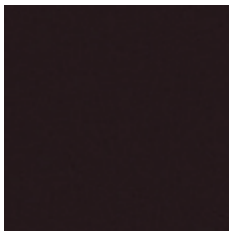nora® Schweizer Puffergummi Zellkautschukplatten, glatt



81 schwarz

Härte:
ca. 23 Shore A

Dichte:
ca. 0,35 g/cm³

Format:
ca. 840x520 mm

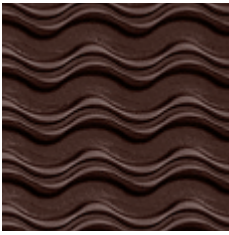
Farbe: 81 schwarz
Dicke: 12 mm

nora® Schweizer Puffergummi ist die erste Wahl für Anwendungen, bei denen es auf hohe Elastizität und Dämpfung und gleichzeitig auf Formstabilität ankommt.

Eigenschaften:

hervorragende Dämpfungseigenschaften. Exzellenter Gehkomfort durch Kombination von sehr niedriger Shore Härte und hoher Rückstellfähigkeit.

nora® Lunasoft



46 dunkelbraun



81 schwarz

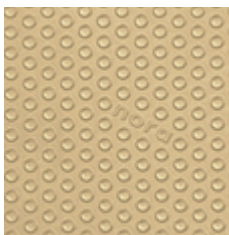
Härte:
ca. 50 Shore A

Dichte:
ca. 0,38 g/cm³


▼ **PROFIL: 78 WELLE GROB**

Format:
ca. 1040x800 mm


Farben: 46 dunkelbraun
81 schwarz
Dicke: 8 mm



05 hellbeige

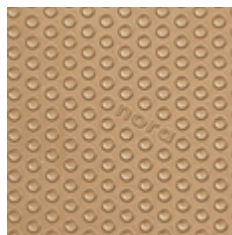

07 beige

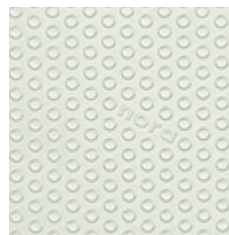


09 weiß

▼ **PROFIL: 97 NOPPE**


Format:
ca. 800x520 mm

Farben: 05 hellbeige
07 beige
41 blassbraun
Dicken: 4 | 6 mm


Farben: 17 graubeige
19 stein
35 mittelbraun
56 steingrau
60 hellgrau
78 dunkelblau
Dicken: 4 | 6 | 8 mm

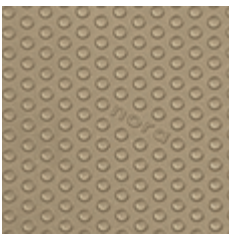

17 graubeige

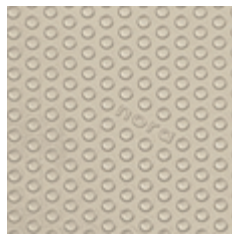


19 stein

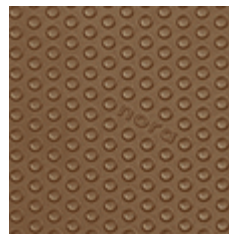


35 mittelbraun


Farben: 09 weiß
46 dunkelbraun
81 schwarz
Dicken: 4 | 6 | 8 | 10 mm

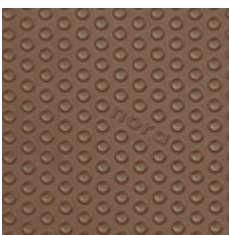

41 blassbraun

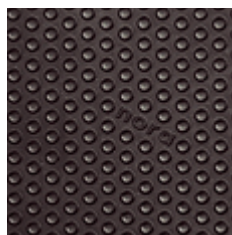

46 dunkelbraun

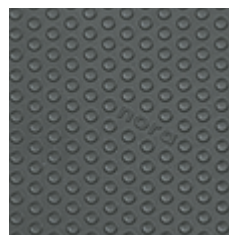

56 steingrau

nora® Lunasoft ist eine EVA-Leichtzellsohlenplatte, die speziell für die Orthopädie-Schuh-technik entwickelt wurde. Die Qualität Lunasoft ist die ideale Kombination aus geringem Gewicht und guter Abriebfestigkeit. Diese Sohlenplatte ist spezifisch leicht, flexibel, elastisch, formstabil und zeichnet sich durch einen hohen Gehkomfort aus.

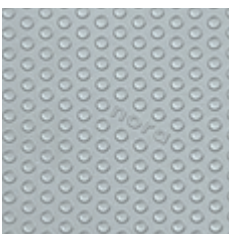
Das Noppenprofil von nora® ist zu einem Klassiker unter den leichten und flexiblen Sohlenmaterialien für Reparatur und Erstausrüstung geworden. Das laufrichtungsfreie „nora“ im Profil macht diese Sohlenplatte zu einem Markenprodukt mit Wiedererkennungswert und dokumentiert das hohe Qualitätsniveau der nora® Premiumprodukte.

Einsatzmöglichkeiten:


- ▶ für Sport- und Freizeitschuhe
- ▶ für den flexiblen Straßenschuh
- ▶ für den orthopädischen Schuh
- ▶ für Interims- und Badeschuhe

Verarbeitungshinweise:

- ▶ EVA-übliche Verklebung
- ▶ Anpressdruck der Flexibilität des Materials anpassen
- ▶ thermoformbar bei 120° – 170° C
- ▶ Verklebung mit Polychloroprene-Klebstoffen
- ▶ PVC-Klebstoffe sind nicht zu empfehlen



60 hellgrau

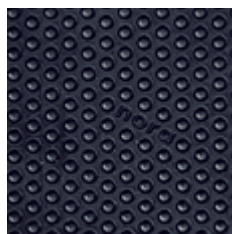

78 dunkelblau

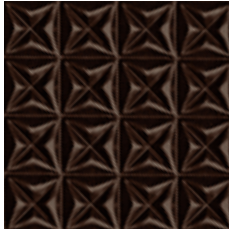


81 schwarz


nora® Astro Soft sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Neben der hochwertigen Qualität und dem geringen Abrieb ist vor allem das niedrige Gewicht eine Anforderung an

moderne Laufsohlenplatten. Die Farben des nora® Astro Soft Sortimentes und die Farben der nora® EVA-Materialien sind aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar.


nora® Astro Soft




46 dunkelbraun

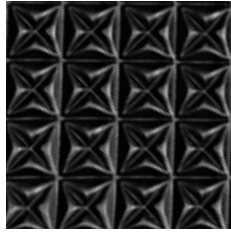


81 schwarz

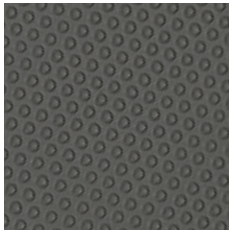

56 steingrau

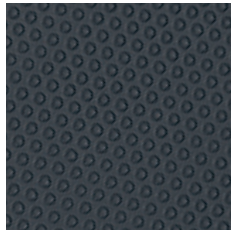

80 anthrazit

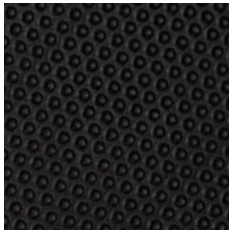

81 schwarz



17 graubeige



46 dunkelbraun



81 schwarz

Härte:

ca. 45 Shore A

Dichte:

ca. 0,40 g/cm³

▼ PROFIL: 09 KREUZECK GROB

Format:

ca. 820x510 mm

Farben:

46 dunkelbraun

81 schwarz

Dicken:

6 | 8 mm

▼ PROFIL: 87 MINI NON-SLIP

Format:

ca. 820x510 mm

Farben:

56 steingrau

80 anthrazit

81 schwarz

Dicken:

6 | 8 mm

Format:

ca. 800x485 mm

Farbe:

81 schwarz

Dicke:

4 mm

▼ PROFIL: 96 BLOCK FEIN

Format:

ca. 840x510 mm

Farben:

17 graubeige

46 dunkelbraun

81 schwarz

Dicken:

4 | 6 | 8 mm

nora® Astro Soft Profil 96 Block fein ist die ideale Laufsohle für elegantes und sportliches Schuhwerk. Das laufrichtungsfreie „nora“ im Profil macht diese Sohlenplatte zu einem Markenprodukt mit Wiedererkennungswert.

Sohlenplatten

nora® **Astrolight** sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Bei der Entwicklung der Qualität **Astrolight** wurde besonderes Augenmerk darauf gerichtet, die bekannt guten Eigenschaften von **Astro** beizubehalten und gleichzeitig das Gewicht des Materials zu reduzieren.

Das Resultat: nora® **Astrolight** ist um ca. 20 % leichter. Geringes Gewicht, exzellenter Abrieb und außerordentliche Flexibilität machen **Astrolight** zur Sohlenplatte für gehobene Ansprüche bei Reparatur, Schuhzurichtung und Herstellung von flexiblem Schuhwerk.

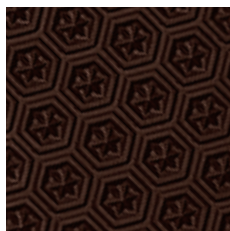
nora® Astrolight Star




09 weiß



19 stein



46 dunkelbraun

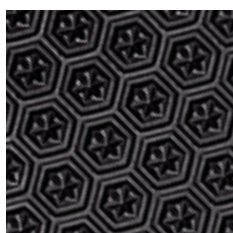

81 schwarz

Härte:

ca. 50 Shore A

Dichte:

ca. 0,50 g/cm³

▼ PROFIL: 64 STAR

Format:

ca. 940x535 mm

Farben:

09 weiß
19 stein
46 dunkelbraun
81 schwarz


Dicken:

4 | 6 mm


nora® Astrolight Delta



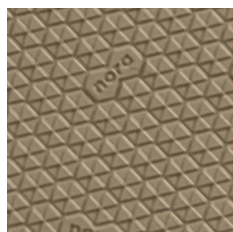
09 weiß




17 graubeige

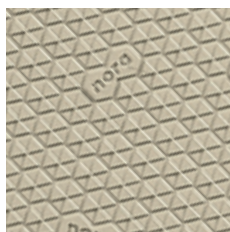


19 stein

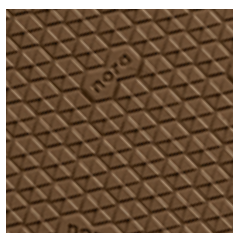


41 blassbraun

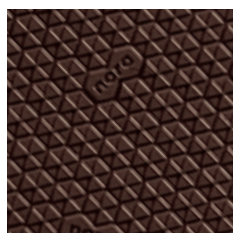


46 dunkelbraun

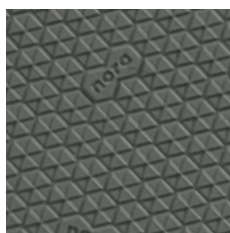


56 steingrau

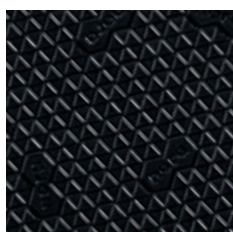

81 schwarz

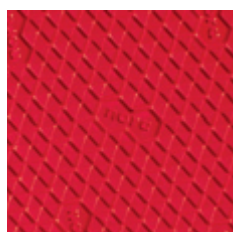

89 rot

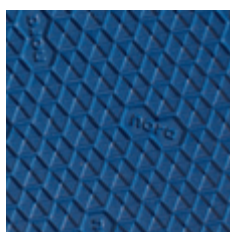

352 jeansblau

Härte:

ca. 50 Shore A

Dichte:

ca. 0,50 g/cm³

▼ PROFIL: 95 DELTA

Format:

ca. 950x535 mm

Farben:

09 weiß
17 graubeige
19 stein
41 blassbraun
46 dunkelbraun
56 steingrau
81 schwarz
89 rot
352 jeansblau

Dicken:


4 | 6 mm

Das Profil 95 Delta steht für außergewöhnliche Optik und sicheren Tritt. Die kleinen Dreiecke des Profils sind zum Sechseck angeordnet. Harmonisch und richtungsfrei fügt sich die Marke nora® ins Bild.

nora® Astro sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Diese Sohlenqualität ist bei spezifisch leichtem Gewicht sehr rutsch- und abriebfest und daher besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die

anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Die Farben des nora® Astro Sortimentes und die Farben der nora® EVA-Materialien sind aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar.

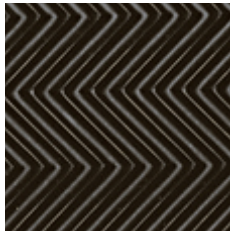nora® Astro



57 smoke



81 schwarz

Härte:
ca. 50 Shore A

Dichte:
0,65 g/cm³

▼ PROFIL: 58 WELLE GROB

Format:
ca. 1020x880 mm

Farben:
57 smoke
81 schwarz

Dicke:
6 mm



57 smoke



81 schwarz



101 lederbraun

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

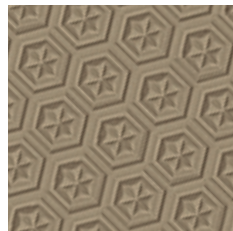
Format:
ca. 880x510 mm

Farben:
57 smoke
81 schwarz
101 lederbraun

Dicke:
6 mm



09 weiß



17 graubeige



19 stein

▼ PROFIL: 64 STAR

Formate:
ca. 860x500 mm
ca. 880x510 mm

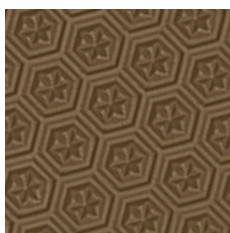
Dicken:
4 mm
6 mm

Farben:
09 weiß
17 graubeige
19 stein
35 mittelbraun
41 blassbraun
46 dunkelbraun
56 steingrau
78 dunkelblau
81 schwarz


Format:
ca. 880x510 mm

Dicke:
8 mm


Farbe:
81 schwarz




35 mittelbraun

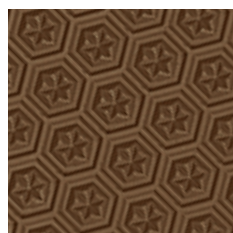


41 blassbraun

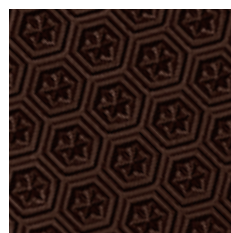


46 dunkelbraun

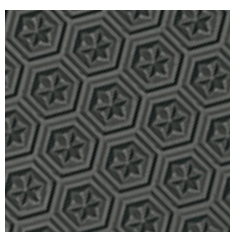

56 steingrau

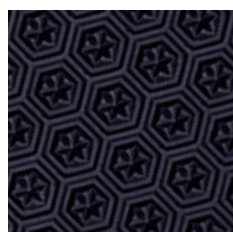


78 dunkelblau

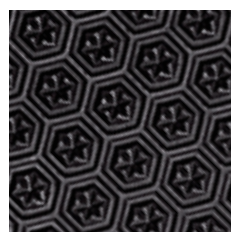


81 schwarz

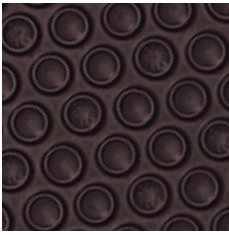nora® Astro



57 smoke

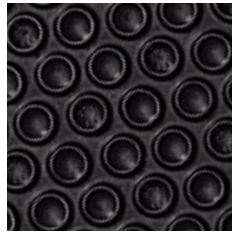

81 schwarz

▼ PROFIL: 65 SAUGNAPP

Format:

ca. 1020x880 mm

Farben:


57 smoke
81 schwarz

Dicken:

5 | 6 mm



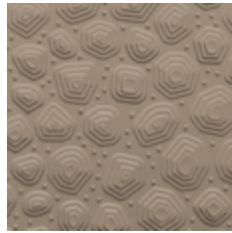09 weiß



17 graubeige



19 stein

▼ PROFIL: 110 GEO

Format:


ca. 880x510 mm

Farben:

09 weiß
17 graubeige
19 stein
46 dunkelbraun
56 steingrau
80 anthrazit
81 schwarz

Dicken:

4 | 6 mm

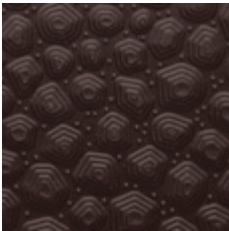

46 dunkelbraun

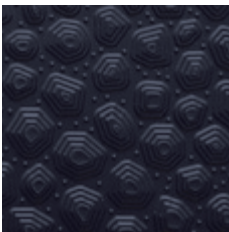


56 steingrau



80 anthrazit

Das Profil 110 GEO ist richtungsfrei, griffig, mehrstufig und auf vier bis fünf Profilebenen verteilt. Die Art des Profils verhindert, dass sich Steinchen und Schmutz festsetzen.




81 schwarz



60 hellgrau



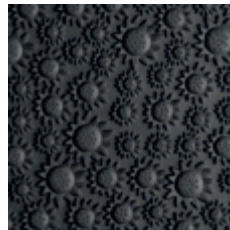70 gelb



81 schwarz

▼ PROFIL: 111 SUNFLOWER

Format:

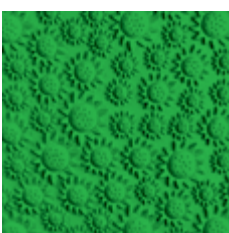
ca. 910x520 mm

Farben:


60 hellgrau
70 gelb
81 schwarz
368 grasgrün
376 tiefblau

Dicke:

5 mm



368 grasgrün

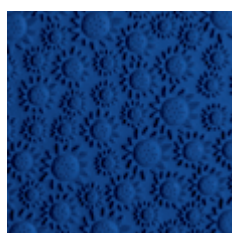

376 tiefblau

nora® Astro Profil 111 Sunflower ist modern, sehr griffig, mehrstufig ausgeprägt und bietet einen sicheren Auftritt. Die richtungsfreie Anordnung der Sonnenblumen macht diese Sohlenplatte flexibel einsetzbar. Die Art des Profils verhindert, dass sich Steinchen und Schmutz festsetzen.

nora® Astral sind Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität **Astral** ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

nora® Astral ist für die hochwertige Reparatur sowie für den Einsatz als Laufsohle bei orthopädischen Schuhszurichtungen und orthopädischen Schuhen geeignet. Die Profil- und Farbvielfalt ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Schuhtyp und jede Jahreszeit.

nora® Astral



03 honig



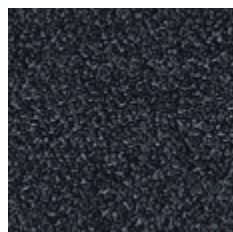
09 weiß




15 kiesel




54 smoke



81 schwarz

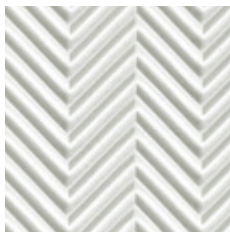

09 weiß

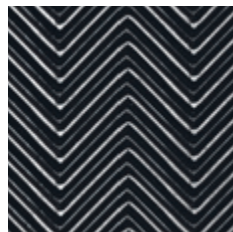

81 schwarz



03 honig



43 schlamm



54 smoke



81 schwarz

Härte:

ca. 69 Shore A

▼ PROFIL: 26 CREPE FEIN

Format:

ca. 1070x770 mm

Farben:

03 honig

09 weiß

15 kiesel

54 smoke

81 schwarz

Dicke:

1,8 mm

nora® Astral Profil 26 Crepe fein ist in 1,8 mm Dicke hervorragend zur Herstellung von Schalenrändern geeignet.

▼ PROFIL: 58 WELLE GROB

Format:

ca. 930x800 mm

Farben:

09 weiß

81 schwarz

Dicken:

4 mm

81 schwarz 6 mm

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

Format:

ca. 1000x550 mm

Farben:

03 honig

43 schlamm

54 smoke


81 schwarz

Dicken:

4 | 6 mm

4 | 6 | 8 mm

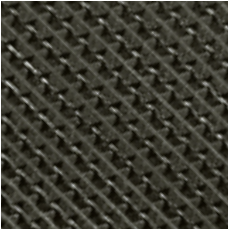nora® Astral



54 smoke

▼ PROFIL: 74 DOPPELSÄGEZAHN

Format:

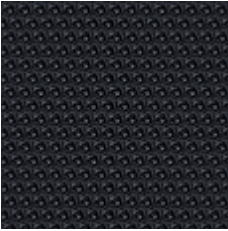
ca. 1070x770 mm

Farbe:

54 smoke

Dicke:

5 mm



81 schwarz

▼ PROFIL: 87 MINI-NON-SLIP

Format:

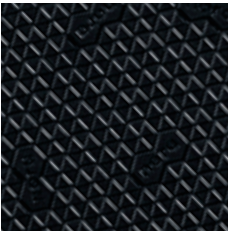
ca. 1070x770 mm

Farbe:

81 schwarz

Dicke:

3 mm



81 schwarz

▼ PROFIL: 95 DELTA

Format:

ca. 790x465 mm


Farbe:

81 schwarz

Dicken:

2,5 | 4 | 6 mm

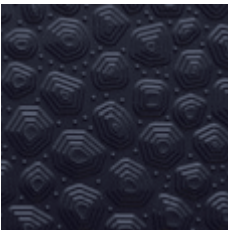nora® Astral Profil 95 Delta steht für außergewöhnliche Optik und sicheren Tritt. Die kleinen Dreiecke des Profils sind zum Sechseck angeordnet. Harmonisch und richtungsfrei fügt sich die Marke nora® ins Bild.



81 schwarz

▼ PROFIL: 110 GEO

Format:

ca. 790x460 mm

Farbe:

81 schwarz

Dicken:

4 | 6 mm

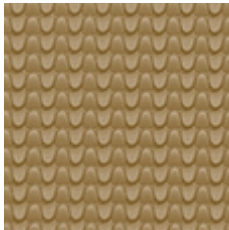
Das Profil 110 GEO ist richtungsfrei, griffig, mehrstufig und auf vier bis fünf Profilebenen verteilt. Die Art des Profils verhindert, dass sich Steinchen und Schmutz festsetzen.

nora® Durotrans sind Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi mit markanten Profilen für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität **nora® Durotrans** ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69


Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

nora® Durotrans ist für die hochwertige Reparatur sowie für den Einsatz als Laufsohle bei orthopädischen Schuhzurichtungen und orthopädischen Schuhen geeignet. Die Profilvervielfalt ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Schuhtyp und jede Jahreszeit.

nora® Durotrans



03 honig

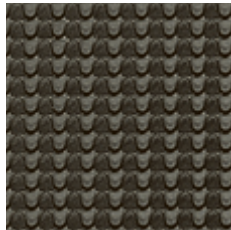

54 smoke

Härte:

ca. 69 Shore A

Format:

ca. 800 x 500 mm


▼ **PROFIL: 34 RASTER**

Farben:

03 honig
54 smoke
81 schwarz

Dicken:


4 | 6 mm

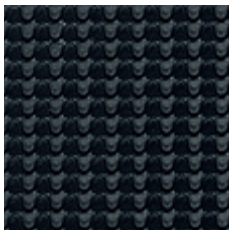

81 schwarz



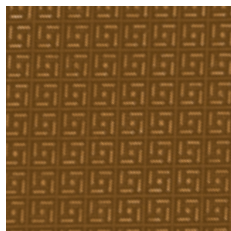81 schwarz



101 lederbraun


▼ **PROFIL: 36 KARO**

Farben:

81 schwarz
101 lederbraun

Dicken:

4 | 6 mm

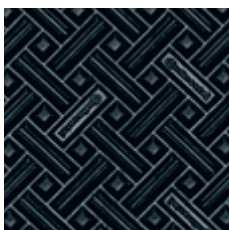

81 schwarz

▼ **PROFIL: 37 PRISMA**

Farbe:

81 schwarz

Dicken:

4 | 6 mm

Sohlenplatten

nora® Contol A



81 schwarz

Härte:
ca. 70 Shore A

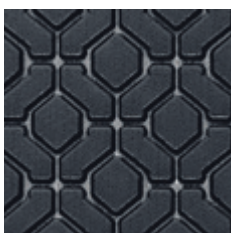
Format:
ca. 1000x800 mm

▼ **PROFIL: 42 KLETTER KLEIN**

Farbe: 81 schwarz
Dicke: 5 mm

nora® Contol A ist eine abriebfeste Sohlenplatte aus öl- und benzinbeständiger Spezialgummimischung mit antistatischen Eigenschaften für die Reparatur von Arbeitsschuhen mit entsprechenden Anforderungen.

nora® Contol FB



81 schwarz

Härte:
ca. 64 Shore A

Format:
ca. 800x500 mm


▼ **PROFIL: 48 BLOCK**

Farbe: 81 schwarz
Dicken: 5 | 6,5 mm

nora® Contol FB ist eine extrem rutschfeste Spezialqualität. Diese Sohlenplatte ist öl-, benzin- und fettbeständig. Die enorme Rutschsicherheit wird durch das offene, angeschliffene Profil mit Drainage zur Abführung von Flüssigkeiten erreicht.

nora® Contol FB ist besonders für Arbeitsschuhe in Nassbereichen, d.h. für das Laufen auf Kachelböden in Verbindung mit Flüssigkeiten, insbesondere in fettbelasteten Räumen wie Küchen oder Molkereien, geeignet.

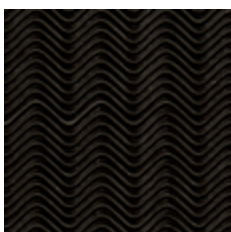nora® Constant



51 schwarzbraun

Härte:
ca. 88 Shore A


Format:
ca. 810x640 mm

▼ **PROFIL: 82 WELLE FEIN**


Farbe: 51 schwarzbraun
Dicken: 2 | 3 mm

nora® Constant ist eine klassische Massiv-Sohlenplatte mit zeitlosem Wellen-Design und hervorragenden Klebeeigenschaften.

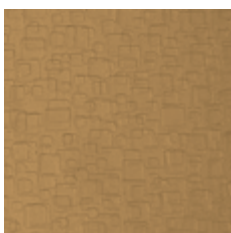nora® Por



26 lederbraun

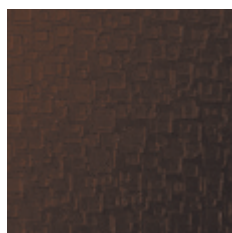

48 antik

Härte: ca. 93 Shore A
Dichte: ca. 1,00 g/cm³

Format:
ca. 1040x520 mm

▼ **OBERFLÄCHE: 67 STRADA**

Farben: 26 lederbraun
48 antik
Dicken: 2,7 | 3,5 | 4,3 mm

nora® Por ist eine Hartzell-Sohlenplatte für die spezielle Verwendung als „künstliches“ Bodenleder bei Damen- und Herrenschuhen. Diese Sohlenplatte hat eine hohe Lebensdauer, gute Klebeeigenschaften und zeigt gegenüber Massiv-Sohlenplatten deutliche Gewichtsvorteile.

nora® Contilit



51 schwarzbraun



81 schwarz



101 lederbraun

Härte:
ca. 87 Shore A

▼ PROFIL: 32 BRILLANT


Format:
ca. 1000x800 mm

Farben:	Dicken:
51 schwarzbraun	1,8 2,7 3,5 4,3 mm
81 schwarz	
101 lederbraun	1,8 2,7 3,5 mm

nora® Contilit mit dem Profil Brillant ist eine feinprofilerte Sohlenplatte für die elegante Reparatur, ideal zu kombinieren mit dem Absatzfleck oder der Absatzplatte nora® Elite.

Spitzenstreifen

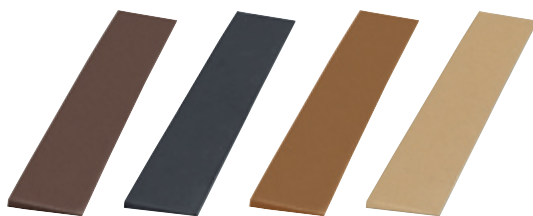nora® Contilit K



51
schwarz-
braun

81
schwarz

101
leder-
braun

110
beige



51
schwarz-
braun

81
schwarz

Härte:
ca. 93 Shore A

▼ OBERFLÄCHE: GLATT

Länge:
ca. 1090 mm

Farben:	Abmessungen:
51 schwarzbraun	3x35 mm
81 schwarz	
51 schwarzbraun	4x40 mm
81 schwarz	
101 lederbraun	
110 beige	

▼ PROFIL: 32 BRILLANT

Länge:
ca. 1000 mm

Farben:	Abmessung:
51 schwarzbraun	4x40 mm
81 schwarz	

nora® Contilit K ist der bewährte Spitzenstreifen für die Reparatur von glatten und leicht profilierten Schuhböden. Gute Klebeeigenschaften sorgen für eine sichere Spitzenreparatur.

nora® Elite



51 schwarzbraun



81 schwarz



101 lederbraun



51 schwarzbraun

▼ PROFIL: 33 BRILLANT

Härte:

ca. 93 Shore A

Format:

ca. 800x500 mm

Farben:

51 schwarzbraun
81 schwarz

Dicken:

5 | 6 mm

101 lederbraun 5 mm

mit Stabilisierungspolster:

Härte:

ca. 90 Shore A (Auftrittsfläche)

Format:

ca. 800x500 mm

Farben:

51 schwarzbraun
101 lederbraun

Dicke:

6 mm

nora® Elite Profil 33 ist eine feinprofilierte Absatzplatte für die elegante Reparatur. Das Laufrichtungsfreie Profil macht diese Absatzplatte zu einem Markenprodukt mit Wiedererkennungswert.

Eigenschaften:

teilweise mit Stabilisierungspolster, Rückseite geschliffen.

▼ PROFIL: 37 PRISMA

Härte:

ca. 90 Shore A (Auftrittsfläche)

Format:

ca. 800x500 mm

Farbe:

51 schwarzbraun

Dicken:


6 | 7,5 mm

nora® Elite Profil 37 ist eine grobprofilierte Absatzplatte mit Winterprofil für einen sicheren Auftritt.


Eigenschaften:

6 mm-Ausführung mit Stabilisierungspolster, Rückseite geschliffen.

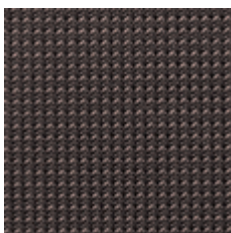nora® Glorit



51 schwarzbraun

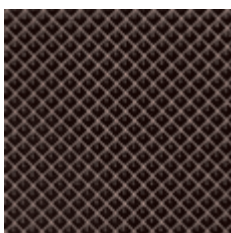

51 schwarzbraun

▼ PROFIL: 39 FRESKO

Härte:

ca. 93 Shore A

Format:

ca. 800x500 mm

Farbe:

51 schwarzbraun

Dicke:

5,5 mm

nora® Glorit Profil 39 ist eine elegante Absatzplatte mit besonders feinem Profil.

▼ PROFIL: 05 PYRAMIDE MITTEL

Härte:

ca. 93 Shore A

Format:

ca. 770x535 mm

Farbe:

51 schwarzbraun

Dicke:

6 mm

nora® Glorit Profil 05 ist eine klassische Absatzplatte mit einem mittleren Pyramidenprofil für sicheren Tritt.

nora® Conrex



81 schwarz

▼ PROFIL: 47 GRIP CT

Härte:

ca. 95 Shore A

Format:

ca. 500x330 mm

Farbe:

81 schwarz

Dicke:

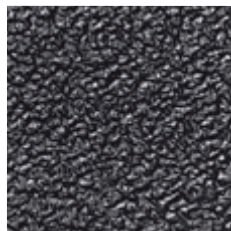
5,7 mm

nora® Conrex ist eine sehr harte und gleichzeitig elastische Kleinfleckplatte aus Kompaktgummi und vor allem für kleine Absatzauflrittsflächen von Damenschuhen optimal geeignet.


nora® Astral H



11 sand



54 smoke

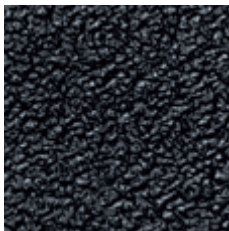

81 schwarz

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

Härte:

ca. 87 Shore A

Format:

ca. 1000x550 mm

Farben:

11 sand

54 smoke

81 schwarz

Dicke:

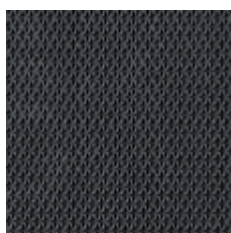
6 mm

nora® Astral H ist eine hartelastische Absatzplatte aus Transparentgummi mit mittlerem Crepe-Profil. Diese Qualität ist vor allem für Hohlabsätze optimal geeignet.

nora® Comfort



51 schwarzbraun



81 schwarz

▼ PROFIL: 06 CRISTAL

Härte:

ca. 67 Shore A

Format:

ca. 770x535 mm

Farben:

51 schwarzbraun

81 schwarz

Dicke:

7 mm

nora® Comfort ist eine hochelastische Absatzplatte, die sich vor allem für Sondergrößen und Sonderformen hervorragend einsetzen lässt.

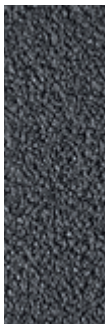
Eigenschaften: hochelastisch, verschleißfest, rutschfest und schockabsorbierend, hoher Gehkomfort durch weiche Mischungsabstimmung, stabiler Unterbau erforderlich, Rückseite geschliffen.

Absatzfleckstreifen


nora® Astral H



11 sand



54 smoke

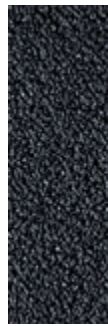

81 schwarz

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

Härte:

ca. 87 Shore A

Länge:

ca. 1000 mm

Breiten:

55 | 72 | 85 mm

Dicke:

6 mm

Farben:

11 sand
54 smoke
81 schwarz

nora® Astral H Absatzfleckstreifen aus hartelastischem Transparentgummi mit mittlerem Crepe-Profil sind hervorragend für die wirtschaftliche Absatzreparatur geeignet. Die Absatzfleckstreifen werden aus der Absatzplatte nora® Astral H hergestellt.

Stanzflecke

nora® Elite



51 schwarzbraun



81 schwarz



101 lederbraun

PROFIL: 33 BRILLANT

Härte:

ca. 90 Shore A (Auftrittsfläche)

Dicke:

6 mm

Verpackungseinheit:

1 kg im Karton

Farbe:

51 schwarzbraun

Größen:

130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148

Farbe:

81 schwarz

Größen:

130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148

Farbe:

101 lederbraun

Größen:

138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148

nora® Elite ist ein eleganter Stanzfleck mit Stabilisierungspolster für die wirtschaftliche und langlebige Reparatur. Dieser Stanzfleck ist die ideale Ergänzung zur Sohlenplatte nora® Contilit.

Eigenschaften: mit Stabilisierungspolster, Rückseite geschliffen.

nora® Kompakt K



51 schwarzbraun 81 schwarz

▼ PROFIL: 13 RIFFEL

Härte: ca. 87 Shore A
Länge: ca. 1070 mm

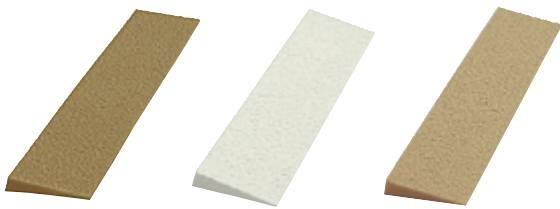
Farben: 51 schwarzbraun
81 schwarz
Abmessungen: 8x40 mm

51 schwarzbraun 10x50 mm
81 schwarz


nora® Kompakt K sind universell einsetzbare Keilstreifen.

Eigenschaften: verschleißfest, stoßelastisch, sehr gute Klebeeigenschaften.


nora® Astral K



03 honig 09 weiß 15 kiesel

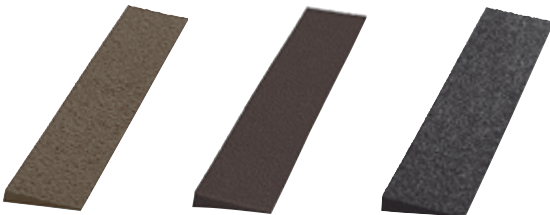

43 schlamm 46 dunkelbraun 54 smoke

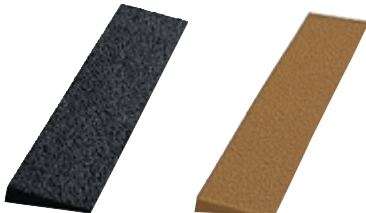

81 schwarz 101 lederbraun

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

Härte: ca. 69 Shore A
Länge: ca. 930 mm

Farben: 03 honig
54 smoke
81 schwarz
Abmessungen: 8x40 mm

03 honig 10x50 mm

15 kiesel
43 schlamm
46 dunkelbraun
54 smoke
81 schwarz
101 lederbraun

03 honig 10x60 mm

09 weiß
43 schlamm
46 dunkelbraun
54 smoke
81 schwarz
101 lederbraun

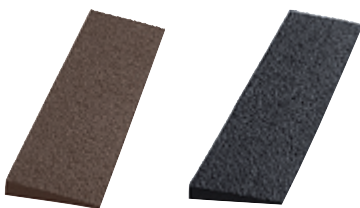
81 schwarz 10x80 mm

81 schwarz 14x65 mm

nora® Astral K sind vielseitig einsetzbare Keilstreifen aus transparentem Kompaktgummi mit Crepe-Profil. Bei Verklebung mit weichen Böden (EVA, PU, TR) entwickelt nora® Astral K eine hohe Dehnungsfähigkeit.

Eigenschaften: verschleißfest, stoßelastisch, sehr gute Klebeeigenschaften, hohe Dehnungsfähigkeit.

nora® Astro K



46 dunkelbraun 81 schwarz

▼ PROFIL: 62 CREPE MITTEL

Härte: ca. 50 Shore A

Dichte: ca. 0,65 g/cm³
Länge: ca. 1020 mm

Farben: 46 dunkelbraun
81 schwarz
Abmessungen: 10x60 mm

81 schwarz 10x80 mm


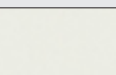

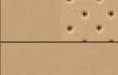
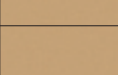

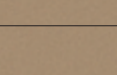
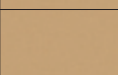
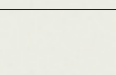
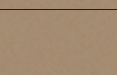





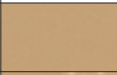




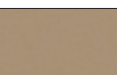









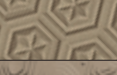

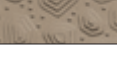

nora® Astro K sind spezifisch leichte Keilstreifen aus Zellkautschuk mit Crepe-Profil, farblich abgestimmt auf die nora® Astro Sohlenplatten.

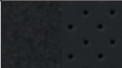


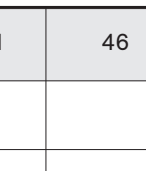





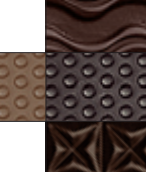







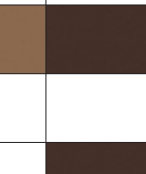







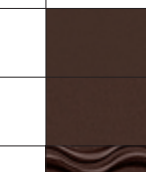















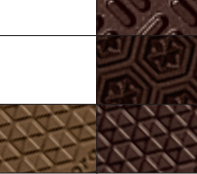

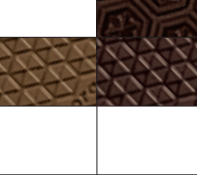


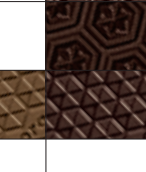

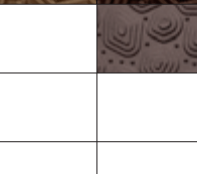






















Eigenschaften: verschleißfest, stoßelastisch, sehr gute Klebeeigenschaften.

Zellplatten-Sortiment

► Diese Übersicht enthält die Standardfarben, die ideal miteinander kombinierbar sind.

Weitere farbige und gemusterte Varianten, z. B. von **nora® Lunasoft SL color**, finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

Material	Ausführung/Profil	Farbnr.	05	07	09	17
Lunairmed						
Lunairflex						
Lunalastik						
Lunasoft SLW						
Lunasoft SL						
Lunasoft AL						
Lunatec SE						
Lunalight A						
Lunacell						
Lunalight K	Keilstreifen					
Lunasoft SLW	Keilstreifen					
Lunasoft	78 Welle grob					
Lunasoft	97 Noppe					
Astro Soft	09 Kreuzeck grob					
Astro Soft	87 Mini Non-Slip					
Astro Soft	96 Block fein					
Astrolight	64 Star					
Astrolight	95 Delta					
Astro	58 Welle grob					
Astro	62 Crepe mittel					
Astro	64 Star					
Astro	110 Geo					
Astro	111 Sunflower					
Astro	65 Saugnapf					
Astro K	62 Crepe mittel Keilstreifen					

19	35	41	46	54/57	56	60	78	80	81	Details/Seite
										11
										11
										12
										18
										19
										21
										21
										22
										23
										30
										30
										32
										32
										33
										33
										33
										34
										34
										35
										35
										35
										36
										36
										36
										45

Transparentplatten-Sortiment

	Farbnummer	03	09	11	15	43	46	54	81	101	Details/ Seite
Material	Ausführung/Profil										
Astral	26 Crepe fein										37
Astral	58 Welle grob										37
Astral	62 Crepe mittel										37
Astral	74 Doppelsägezahn										38
Astral	87 Mini Non-Slip										38
Astral	95 Delta										38
Astral	110 Geo										38
Durotrans	34 Raster										39
Durotrans	36 Karo										39
Durotrans	37 Prisma										39
Astral H	62 Crepe mittel										43
Astral H	62 Crepe mittel Absatzstreifen										44
Astral K	62 Crepe mittel Keilstreifen										45

Aufwärm- und Abkühlzeiten von Verbundplatten

	Aufwärmzeit min.	Abkühlzeit min.		Aufwärmzeit min.	Abkühlzeit min.
Lunatec combi 1	6	12	Lunatec combi cork 1	5	10
Lunatec combi 2	9	18	Lunatec combi CW	5	10
Lunatec combi 3	9	18	Lunatec combi motion 1	5	10
Lunatec combi 4	5	10	Lunatec combi T1	8	16
Lunatec combi 5	3	6	Lunatec combi motion T2	9	18
Lunatec combi 6	6	12			
Lunatec combi 7	5	10			
Lunatec combi 8	6	12			

Die angegebenen Zeiten sind erprobte Richtwerte, denen eine gleichbleibende Temperatur von 130° C zugrunde liegt. Je nach Ofen, Temperaturgenauigkeit, Häufigkeit der Türöffnung und eigenen Erfahrungswerten können diese Zeiten abweichen.

Einstellung des Ofens 130° C

Faustformel: Aufwärmzeit x 2 = optimale Abkühlzeit

Noch Fragen offen? Dann sprechen Sie uns an!

Tel. +49 (0) 6201 805486 | Fax +49 (0) 6201 884683
info-eva@nora.com | www.nora-material.de



Kundenservice

Neben der hervorragenden Produktqualität können Sie sich auf unseren professionellen Kundenservice verlassen. Unsere Fachberater im Außendienst stehen Ihnen bei Anwendungsfragen oder besonderen Problemstellungen telefonisch oder vor Ort gerne zur Verfügung. Darauf können Sie sich verlassen!



Social media & YouTube

Folgen Sie uns auf **Facebook** und **Instagram**, erfahren Sie auf direktem Weg von Produktneuheiten und interessanten Anwendungsbeispielen oder teilen Sie Ihre Praxisbeispiele und Erfahrungen mit unseren Materialien.

In unserem **YouTube** Kanal finden Sie hilfreiche Verarbeitungstipps und dokumentierte Anwendungsbeispiele. Lassen Sie sich von unseren Videos inspirieren.



Website

Auf unserer Website www.nora-material.de erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Materialentwicklungen, Produktneuheiten, Zertifizierungen, Anwendungsbeispiele, Messetermine, Workshops und vieles mehr.



Newsletter

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig per E-Mail über neue Produkte und Lösungen für die Orthopädie-Schuh-technik, Orthopädie-Technik, Schuhreparatur sowie industrielle Einsatzbereiche. Kostenlos und unverbindlich. Wir versenden maximal 3–5 Ausgaben pro Jahr. Nehmen Sie sich einige Sekunden Zeit und melden Sie sich auf www.nora-material.de an.



Kundenzeitschrift

Mit unserer Kundenzeitschrift „Auf Schritt & Tritt“ informieren wir Sie 1–2 mal jährlich über alle wichtigen Neuigkeiten und verraten jede Menge Wissenswertes aus Weinheim. Sollten Sie diese Zeitschrift noch nicht erhalten, aber Interesse an einem kostenfreien Abonnement haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an redaktion@nora.com.

Für Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Die Produktabbildungen in diesem Dokument können vom Original abweichen.
Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

Die Marke **nora**[®] sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder für eines der mit der **nora systems GmbH** verbundenen Unternehmen eingetragen. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

nora systems GmbH

EVA solutions for health and industry
Höhnerweg 2 – 4
69469 Weinheim

Deutschland: +49 6201 80-5342

+49 6201 80-5486

International: +49 6201 80-7716

+49 6201 80-5316

Fax: +49 6201 88-4683

E-Mail: info-eva@nora.com

Website: www.nora-material.de

Facebook: facebook.com/norasystems



Gedruckt auf FSC[®]-zertifiziertem Papier.